

Lanceta de incisión Safety-Heel® Neonatos/Prematuros

Toma de muestra en talón de neonatos y prematuros



Flujo óptimo de sangre y profundidad de incisión controlada


La punción de talón en neonatos para toma de muestra sanguínea es un paso crucial para la detección de posibles enfermedades congénitas. Con las lancetas convencionales, la punción se realiza por medio de un pinchazo vertical, el riesgo de lesión (penetración hasta el hueso) y de formación de hematomas es muy alto. Este procedimiento resulta doloroso en muchas ocasiones. La lanceta de incisión Safety-Heel® es una opción óptima para reducir la sensación de dolor y optimizar al mismo tiempo la obtención de sangre. La trayectoria de incisión semicircular y la reducida profundidad de punción, previenen la formación de hematomas. Este procedimiento permite una extracción de sangre mucho más cuidadosa, especialmente en los pacientes de más corta edad.

Lanceta innovadora: alta velocidad de toma de muestra

- Flujo óptimo de sangre sin necesidad de presión o masaje
- Volumen de sangre suficiente
- Sensación de dolor notablemente reducida
- Cicatrización rápida, gracias a la profundidad de punción reducida
- Se evita la formación de hematomas




Lanceta de incisión Safety-Heel® Neonatos/Prematuros

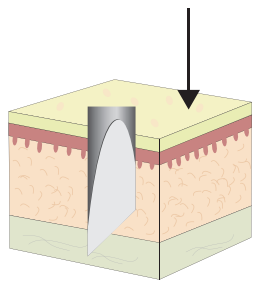

Lanceta estándar


- Disparo de **dirección vertical**
- Punción cilíndrica
- Formación de hematoma

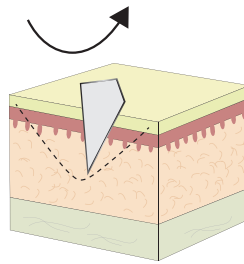


Lanceta de incisión

- Trayectoria de incisión **semicircular**
- Menor profundidad de punción
- Se evita la formación de hematomas


Instrucciones de uso

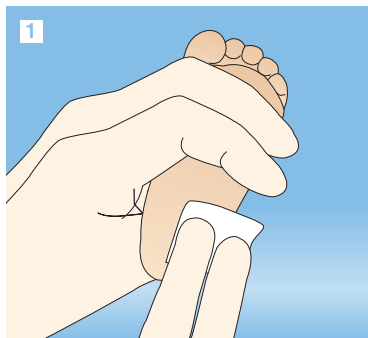


1. Seleccionar el punto de punción adecuado y desinfectar.

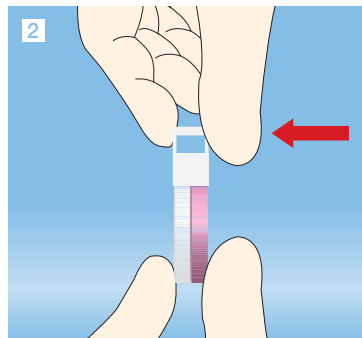


2. Retirar el mecanismo de seguridad

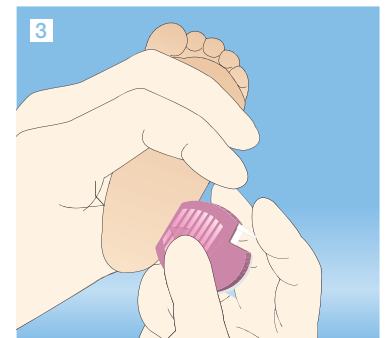


3. Elevar el pie hasta una posición adecuada. Presionar la apertura de la cuchilla paralela al punto de punción desinfectado. Activar el botón de disparo. La lanceta de incisión Safety se debe colocar y activar **siempre en paralelo al pie** (nunca oblicuamente). Presionar el botón de activación.

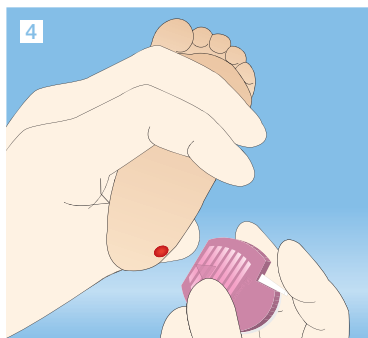

4. Retirar la lanceta del talón.

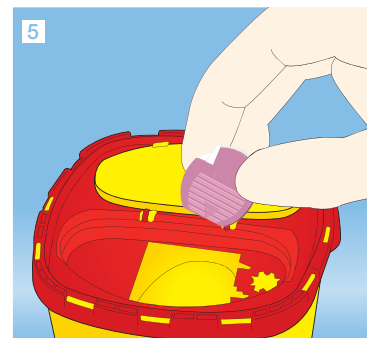

5. Eliminar la lanceta en un recipiente de eliminación adecuado

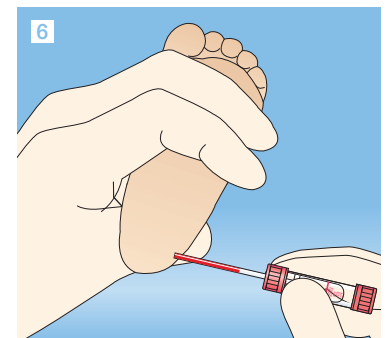

6. Desechar las primeras gotas de sangre. A continuación, llenar el capilar.

Información

	Ref.	Ámbito de aplicación	Profundidad de la punción	Longitud de corte	Presentación
	85.1022	Neonatos	1,0 mm	2,5 mm	50 / caja interna 200 / caja externa
	85.1023	Prematuros	0,85 mm	1,75 mm	

SARSTEDT S. A. U.
P. I. Valldoríolf
Camí de Can Grau, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com