

Безопасные ланцеты (лезвие) Safety-Heel® для новорожденных

Пункция пятки у недоношенных и новорожденных детей



Максимальное количество крови при минимальной глубине прокола

У новорожденных для правильного и эффективного лечения необходимо как можно раньше обнаружить врождённые эндокринопатии и нарушения обмена веществ. В рамках «скрининга новорожденных» кровь берется путём пункции пятки. Прокол производится ланцетом в вертикальной плоскости (под прямым углом к поверхности). Такая пункция сопряжена с высоким риском травмирования (повреждение надкостницы) и образования гематомы у ребенка. Отмечается также болезненность данной процедуры. Безопасный ланцет Safety-Heel® позволяет снизить болевые ощущения и одновременно оптимизировать процедуру взятия крови.


Благодаря полукруглой форме разреза и его малой глубине риск образования гематомы минимален. Это позволяет обеспечить щадящее взятие крови у маленьких пациентов.

Современные безопасные ланцеты с полукруглой формой разреза

- Оптимальный ток крови без дополнительного массирования места пункции
- Достаточный объём пробы
- Значительное уменьшение болевых ощущений
- Быстрое заживление благодаря незначительной глубине прокола
- Снижение риска образования гематом




Безопасные ланцеты (лезвие) Safety-Heel® для новорожденных

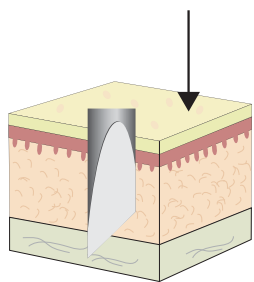

Стандартный ланцет


- **вертикальное** направление движения лезвия
- прокол цилиндрической формы
- риск образования гематомы

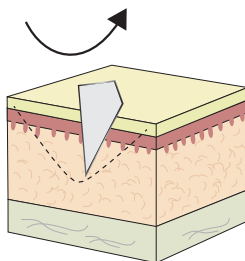

Ланцет с полукруглой формой разреза

- **полукруглая** форма разреза
- уменьшенная глубина прокола
- снижение риска образования гематом


Работа с ланцетом Safety-Heel®

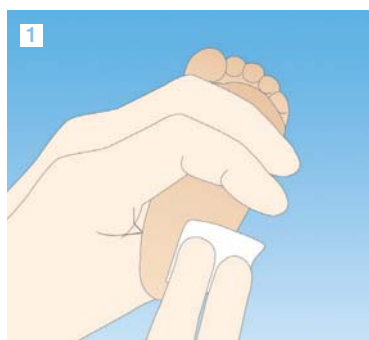


1 Выберите и продезинфицируйте место пункции.




2 Указательным пальцем отведите назад натяжное устройство белого цвета – ланцет готов к работе.

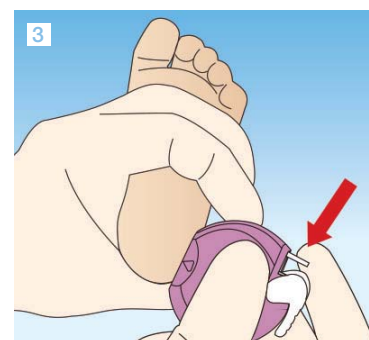


3 Удерживайте стопу в удобном положении. Прижмите отверстие ланцета к продезинфицированному месту пункции и нажмите на кнопку спуска лезвия. Ланцет необходимо размещать и активировать исключительно вдоль стопы (не устанавливайте ланцет под углом). Вершина треугольника указывает на место выхода лезвия.

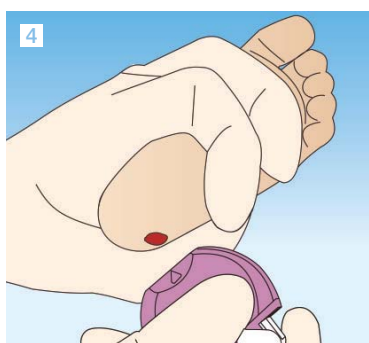

4 После нажатия на кнопку спуска уберите ланцет от пятки.

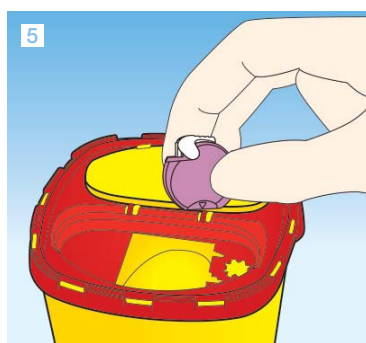

5 Поместите использованный ланцет в соответствующий контейнер для утилизации.

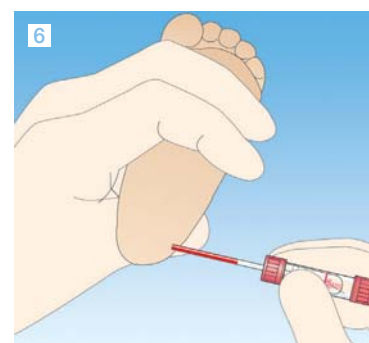

6 Не используйте первую каплю крови. Заполните капилляр.

Информация для заказа

	Кат. №	Область применения	Глубина прокола	Длина разреза	Упаковка
	85.1025	Недоношенные	0,85 мм	1,75 мм	50 шт. во внутр. уп. 200 шт. в наружн. уп.
	85.1026	Новорожденные	1,0 мм	2,5 мм	

ООО «САРШТЕДТ»
Большой Строченовский пер. 7, офис 602
115054 Москва
Тел: +7 495 937 52 28
факс: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com

SARSTEDT