

# SMC 6 V

Výkonná a variabilně nastavitelná stolní centrifuga

**NOVÉ**  
Nyní s 2 500 x g




- Možnost variabilního nastavení 3 centrifugačních programů
- Centrifugace max. do 2 500 x g
- Vysoká kvalita a snadná obsluha



## Možnost použití 3 centrifugačních programů

K dispozici jsou 3 centrifugační programy.

- Program 1: krev, 2 500 x g po dobu 10 minut
- Program 2: moč, 500 x g po dobu 5 minut
- Program 3: možnost variabilního nastavení

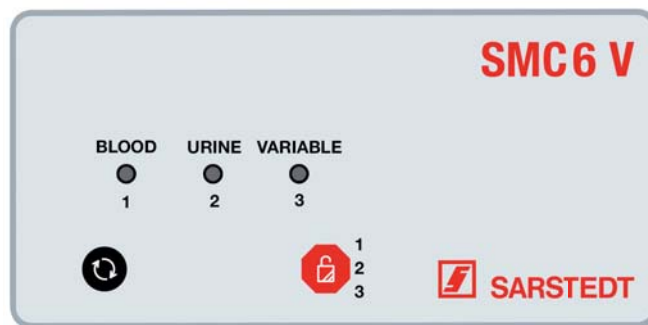

## Optimální dělicí vrstva díky výkyvnému rotoru


Centrifuga SMC 6 V je koncipována speciálně pro použití v ordinacích lékařů nebo v malých laboratořích a lze ji použít pro všechny běžné zkumavky se vzorky. Ihned po odběru krve tak lze v sérových nebo plazmových zkumavkách vytvořit spolehlivou gelovou bariéru. Díky této difuzní bariéře je zajištěna exaktní stabilita vzorku.

### Centrifugace s výkyvným rotorem (SMC 6 V)

- Silná a stabilní dělicí vrstva
- Více materiálu pro analytické automaty

#### Výkyvný rotor


Pro optimální účinnost gelové vrstvy doporučujeme používat k centrifugaci zkumavek S-Monovette® výkyvné rotory.

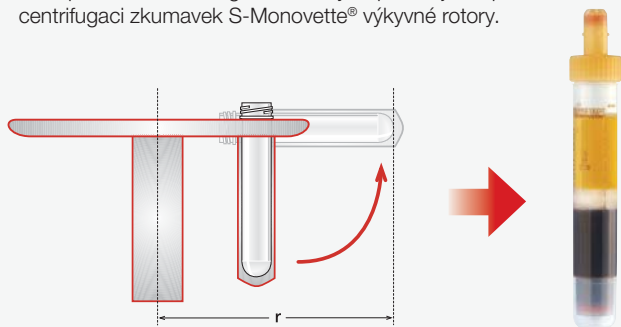

### Centrifugace s úhlovým rotorem

- Tenká a nestabilní dělicí vrstva
- Méně materiálu pro analytické automaty

#### Úhlový rotor

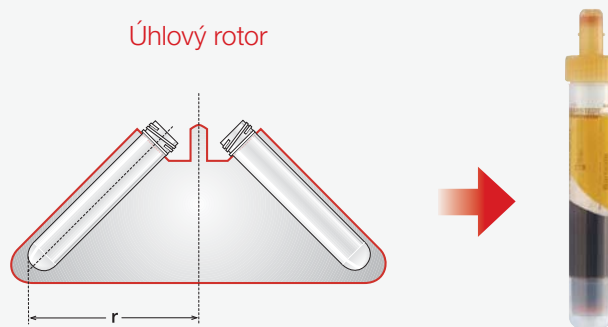

## Snadná obsluha

Na základě velmi snadného způsobu obsluhy pomocí pouhých dvou, příp. tří tlačítek, je vyloučeno nesprávné zadání či nechtěná změna otáček a doby trvání centrifugace.

### Informace k objednávání

Objednací číslo	Název
90.184.400	Centrifuga SMC 6 V

SARSTEDT spol. s r.o.  
Pod Pekárnami 338/12  
190 00 Praha 9  
Tel: +420 281 021 491  
Fax: +420 281 021 495  
info.cz@sarstedt.com  
www.sarstedt.com