

# Microvette® APT

Automated Processing Tube

Para uma análise de sangue capilar compatível com a rotina



# COMPATÍVEL COM A ROTINA

- ✓ Processamento automatizado de amostras logo a partir de um volume de 250 µl
- ✓ Tampa com membrana perfurável
- ✓ Preparação de K<sub>2</sub> EDTA, adequada para volumes de 250 – 500 µl de sangue capilar




# Microvette® APT

## Automated Processing Tube

Quando não é possível obter amostras de sangue venoso, a expectativa de colher amostras de sangue capilar de pacientes com condições venosas difíceis, como é o caso de crianças ou idosos.


A Microvette® APT foi especialmente desenvolvida para processamento automático em analisadores hematológicos e cumpre todos os requisitos importantes para um recipiente primário, tais como as dimensões do tubo exterior de 75 x 13 mm.

A combinação de competência técnica e de uma recém-desenvolvida tampa de membrana, permitem-nos efetuar uma contagem hematológica em modo automático, sem necessidade de preparação manual da amostra e sem interromper a operação de rotina - de igual modo, como se fossem amostras de sangue venoso.

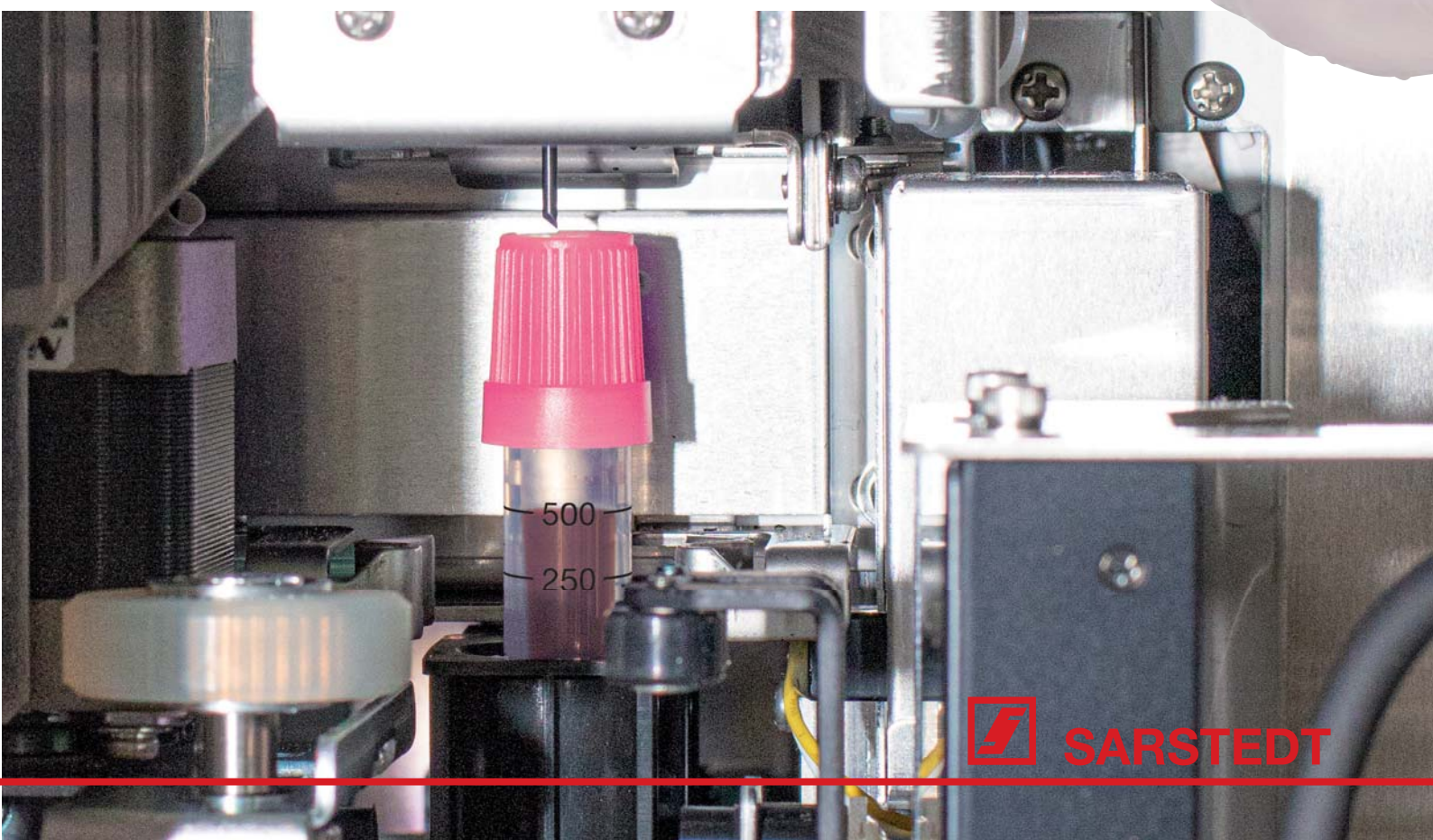

# FLEXÍVEL

- ✓ Capilar (250 µl) para um volume de amostra definido
- ✓ Rebordo de colheita integral facilita a recolha da amostra e a sua homogeneização com o anticoagulante
- ✓ Rótulo transparente do produto para facilitar a avaliação da amostra

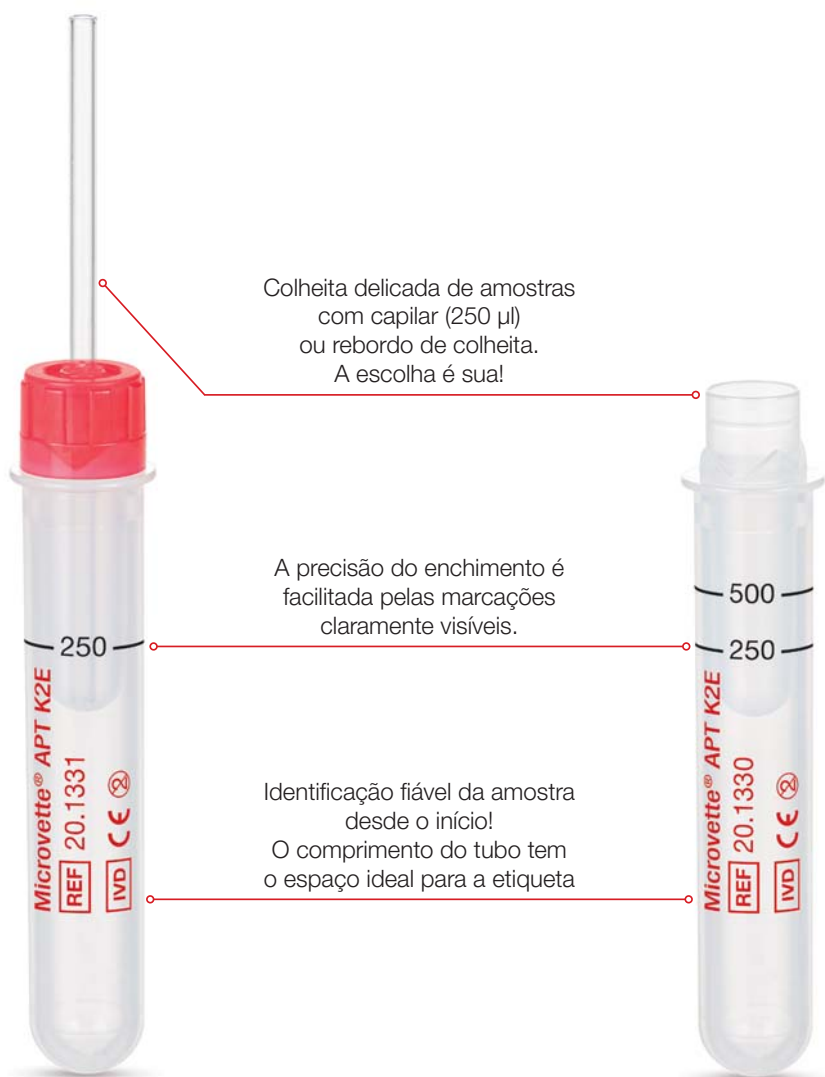

Microvette® APT 250

Microvette® APT 500

Redução do tempo de análise - direta e higiénica a partir do tubo primário. A tampa de membrana recém-desenvolvida garante ao mesmo tempo um transporte e um envio seguros da amostra.





A gota decisiva quando é importante fazer um diagnóstico relevante com pequenas quantidades de sangue ou em condições venosas difíceis.



## Maior flexibilidade através de duas técnicas de colheita



### Capilar – 250 $\mu$ l

A Microvette® APT 250 dispõe de um capilar integrado, sendo por isso ideal para a colheita de 250  $\mu$ l de sangue capilar.

Depois do enchimento completo do capilar, a amostra de sangue pode ser transferida de forma conveniente e higiénica para a Microvette® APT 250 mantendo o recipiente na vertical.

A facilidade de utilização da tampa, permite uma rápida preparação da amostra para um transporte estanque.



### Rebordo de colheita 250 – 500 $\mu$ l


A Microvette® APT 500 dispõe de um volume de enchimento variável entre 250 e 500  $\mu$ l. É o recipiente de amostra ideal para sistemas de análise de sangue que precisem de um volume de amostra entre 250 e 500  $\mu$ l.

A recolha da amostra pode ser efetuada ao longo de todo o rebordo de colheita, favorecendo uma excelente homogeneização do sangue com o anticoagulante e prevenindo a formação de coágulos.

A facilidade de utilização da tampa, permite uma rápida preparação da amostra para um transporte estanque.

# SEGURO

- ✓ Estanque, em conformidade com o regulamento sobre embalagens P 650 do ADR/RID
- ✓ Aprovado para utilização no sistema de transporte Tempus600®
- ✓ Compatível com correio pneumático para um transporte rápido

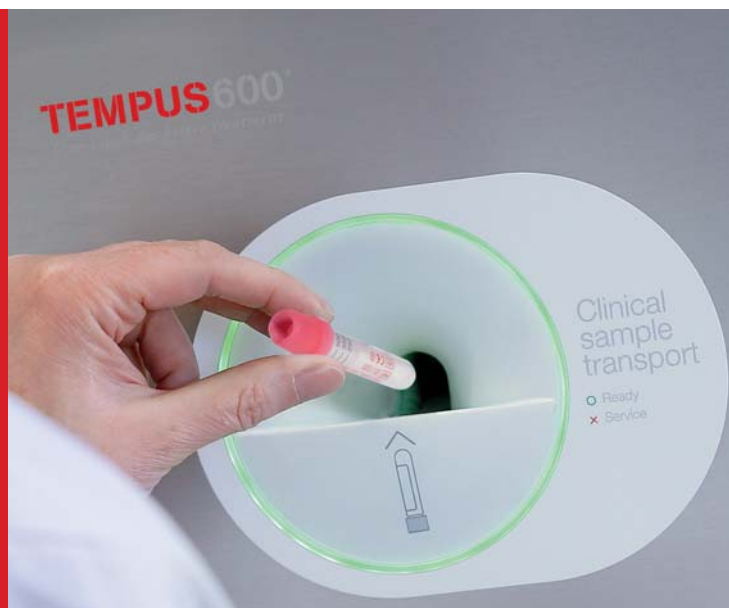

A Microvette® APT é indicada para o transporte através dos mais modernos sistemas e satisfaz os requisitos do regulamento sobre embalagens P 650 do ADR/RID para recipientes primários.

Utilizando os mesmos procedimentos das amostras venosas de rotina, a Microvette® APT minimiza de uma forma conveniente, as fontes de erro pré-analíticas durante o transporte e o envio, bem como no processamento automatizado nos analisadores hematológicos.

A utilização da Microvette® APT também permite reduzir o tempo de resposta (TAT) na análise de colheitas capilares, bem como a necessidade de repetição de colheitas de sangue.. A bem de grupos de pacientes muito especiais.





### Informações de encomenda

Ref. <sup>a</sup>	Designação	Dimensão	Volume	Código de cor	Embalagem
20.1330	Microvette® APT 500 K <sub>2</sub> E	75 x 13 mm	250 - 500 µl	EU	100 unid/caixa interna 500 unid/caixa
20.1331	Microvette® APT 250 K <sub>2</sub> E com capilar	75 x 13 mm	250 µl	EU	50 unid/caixa interna 500 unid/caixa



## **SARSTEDT S.A.**

Sintra Business Park, Edifício 8  
Zona Industrial da Abrunheira  
2710-089 Sintra

Tel: +351 21 915 6010

Fax: +351 21 915 6019

[info.pt@sarstedt.com](mailto:info.pt@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



**SARSTEDT**