

Analýza krevních plynů

Odběrové systémy pro odběry krve z tepen, žil a kapilár



- Odběry z tepen a žil & příslušenství
- Kapilární odběr & příslušenství

Široký výběr technik odběru umožňuje bezpečný a hygienický odběr krve – od libovolného pacienta

Odběry z tepen a žil & příslušenství


Nižší objem vzorku

Pro analýzu krevních plynů krve z žil a tepen je z důvodu nižšího zatížení pacientů vedle naší 2 ml verze ABR Monovette® program doplněn i o 1 ml verzi. Přítomnost Ca²⁺ kompenzovaného Heparinu umožňuje použití těchto systémů i k stanovení elektrolytů.



Hygienické odvědušnění

Po odběru krve je na ABR Monovette® nasazen odvědušňovací filtr a vzduch obsažený ve zkumavce je hygienicky a bez rizika kontaminace vytlačen do filtru. Bez použití tampónu. Při transportu do analyzátoru může sloužit odvědušňovací filtr jako uzavírací víčko.

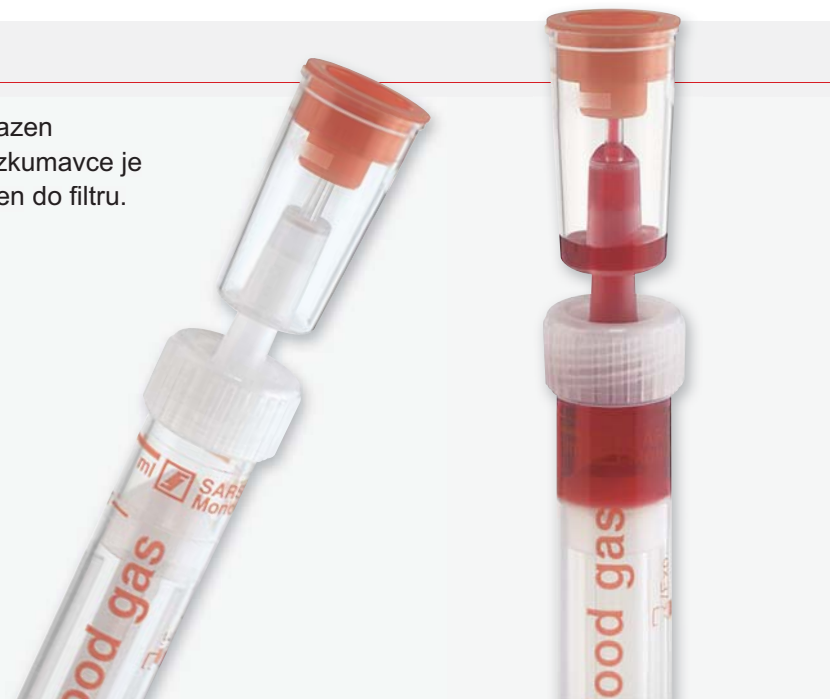

Kapilární odběr & příslušenství

Pro vzorky o malém objemu a pro optimální slučitelnost s přístroji nabízíme pro analýzu krevních plynů plastové kapiláry různých rozměrů a objemů.


Přesné výsledky

Speciální plast s nízkou propustností plynů v kombinaci s povlakem heparinu kompenzovaného Ca²⁺ zaručuje přesné výsledky testů. Speciální povrchová úprava umožňuje rychlé plnění kapilár pro snadný odběr a minimální riziko koagulace.



Bezpečný odběr

Netříštivý plast zabraňuje riziku poranění a infekce uživatele.

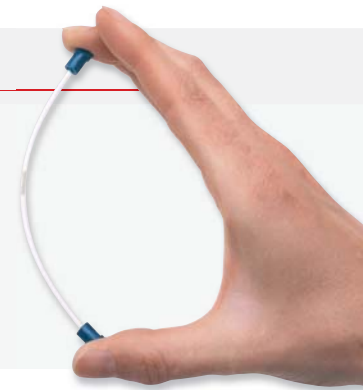

Příslušenství


Víčka

Dvě nabízené velikosti víček zajišťují spolehlivé a bezpečné uzavření kapilár různých průměrů.



Míchací drát a magnet

Pro optimální promíchání krevního vzorku s antikoagulantem slouží kuželkový magnet, jehož pomocí se pohybuje míchacím drátem nahoru a dolů.

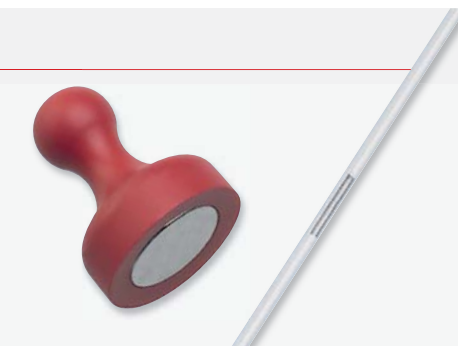

ABR Monovette®



Obj. č.	Popis	Balení
05.1146	ABR Monovette® 1 ml	50 Ks/vnitřní obal, 500 Stk./Karton
05.1146.020	ABR Monovette® 1 ml, individuálně balené, sterilní	100 Ks/vnitřní obal, 500 Stk./Karton
05.1147	ABR Monovette® 2 ml	50 Ks/vnitřní obal, 500 Stk./Karton
05.1147.020	ABR Monovette® 2 ml, individuálně balené, sterilní	100 Ks/vnitřní obal, 500 Stk./Karton
05.1147.048	ABR Monovette® s odvzdušňovacím filtrem, individuálně balené, sterilní	100 Ks/vnitřní obal, 500 Stk./Karton
14.1148	Odvzdušňovací filtr	500 Ks/vnitřní obal, 1.000 Stk./Karton

Plastové kapiláry na krevní plyny



Obj. č.	Popis	ø /délka v mm	Balení
19.930.100	Plastové kapiláry na krevní plyny, 100 µl	2,05/100	250 ks
19.930.125	Plastové kapiláry na krevní plyny, 125 µl	2,05/110	250 ks
19.930.140	Plastové kapiláry na krevní plyny, 140 µl	2,3/75	200 ks
19.930.175	Plastové kapiláry na krevní plyny, 175 µl	2,3/100	200 ks

Sady plastových kapilár na krevní plyny



Obj. č.	Popis	Balení
51.931.100	Sada plastových kapilár na krevní plyny, 100 µl, víčka a míchací dráty	1.000 ks
51.931.125	Sada plastových kapilár na krevní plyny, 125 µl, víčka a míchací dráty	1.000 ks
51.931.140	Sada plastových kapilár na krevní plyny, 140 µl, víčka a míchací dráty	800 ks
51.931.175	Sada plastových kapilár na krevní plyny, 175 µl, víčka a míchací dráty	800 ks

Příslušenství



Obj. č.	Popis	Balení
65.935.205	Víčko, bílé pro kapiláru na krevní plyny, vnější prům. 2,05 mm	500 ks
65.935.230	Víčko, modré pro kapiláru na krevní plyny, vnější prům. 2,3 mm	400 ks
95.936	Míchací drát, 1 mm, délka 9 mm	250 ks
95.937	Kuželkový magnet, červený	10 ks

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel. (00420) 281 021 491
Fax (00420) 281 021 495
sarstedt@sarstedt.cz
www.sarstedt.com