

Analiza gazometryczna krwi

Akcesoria do pobierania próbek krwi z tętnic, żył i naczyń włosowatych



- Pobieranie próbek z tętnic i żył & akcesoria
- Kapilarne pobieranie krwi & akcesoria

Wybór sposobu pobierania próbki umożliwia pewne i higieniczne pobieranie krwi u każdego pacjenta

Pobieranie próbek z tętnic i żył & akcesoria

Ograniczona wielkość próbki

W celu zmniejszenia obciążenia pacjenta podczas przeprowadzania analizy gazometrycznej krwi żyłnej i tętniczej program został uzupełniony, obok posiadanej już znanej Monovette® o pojemności 2 ml, o wersję o pojemności 1 ml.


Dzięki zastosowaniu heparyny zrównoważonej Ca²⁺ nowe próbki nadają się również do oznaczania elektrolitów.



Wentylacja higieniczna

Po pobraniu próbki krwi na próbkę Monovette® zakłada się filtr odpowietrzający a zawarte w niej powietrze bez stosowania wacika w sposób higieniczny i bez powodowania zanieczyszczenia tłoczony jest do obudowy filtra.

Na czas transportu do analizatora gazometrycznego filtr odpowietrzający może pełnić funkcję kapturka.

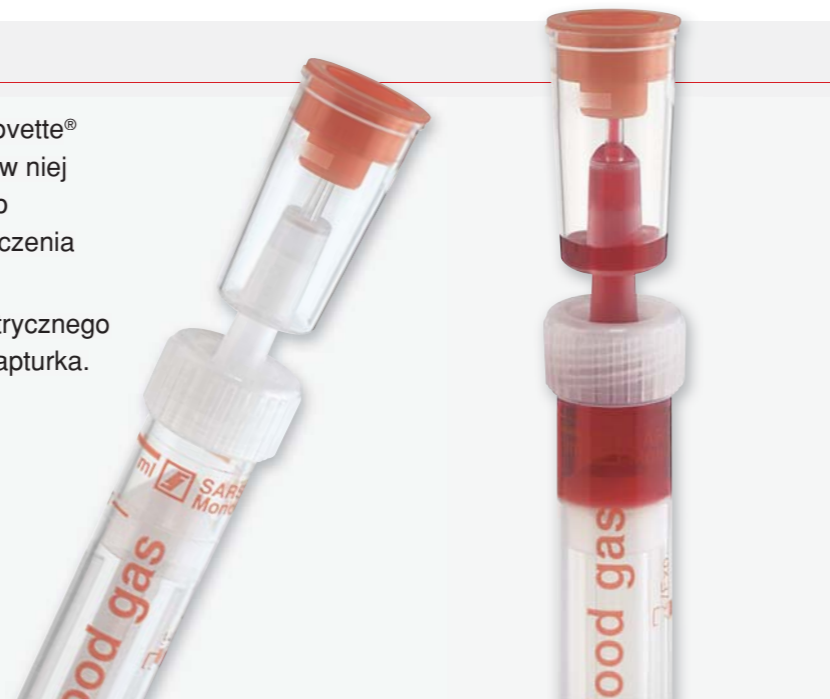

Kapilarne pobieranie krwi & akcesoria

Na niewielkie próbki krwi i w celu zapewnienia optymalnej kompatybilności z analizatorami gazometrycznymi kapilary gazometryczne dostępne są w wersji z tworzywa sztucznego w różnych wielkościach i o różnych pojemnościach.

Wiarygodne wyniki pomiarów i Optymalny ciąg


Specjalne tworzywo sztuczne o niewielkiej gazoprzepuszczalności oraz starannie dobrana powłoka z heparyny zrównoważonej Ca²⁺ gwarantują poprawne wyniki pomiarów.

Dzięki specjalnie przygotowanej powierzchni kapilary, zapewniającej szybkie jej napełnianie, pobieranie próbki jest łatwiejsze a ryzyko tworzenia się skrzepów znacznie zmniejszone.



Bezpieczne pobieranie próbek

Nielamliwe tworzywo sztuczne zapobiega skaleczeniom i infekcjom użytkowników.

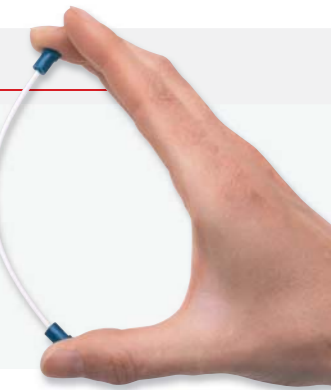

Materiały dodatkowe


Zatyczki

Kapturki różnej wielkości gwarantują poprawne i bezpieczne zamknięcie kapilar o różnych średnicach zewnętrznych.



Mieszadła i magnes

Aby w sposób optymalny wymieszać próbkę materiału z antykoagulantem, używa się poręcznego stożkowego magnesu, za pomocą którego przesuwana się mieszadła wewnątrz kapilary.

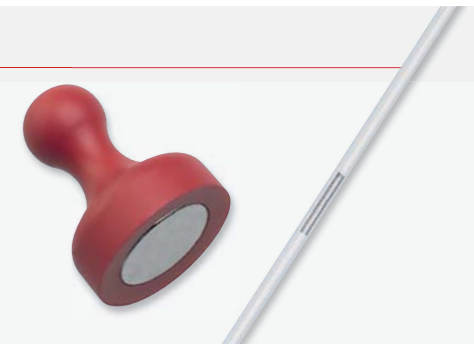

Informacje potrzebne do zamówienia

Monovette® do gazometrii krwi



Nr katalogowy	Nazwa	Opakowanie
05.1146	Monovette® do gazometrii krwi 1 ml	50 szt./pudełko, 500 szt./karton
05.1146.020	Monovette® do gazometrii krwi 1 ml, pojedyncza, sterylna	100 szt./pudełko, 500 szt./karton
05.1147	Monovette® do gazometrii krwi 2 ml	50 szt./pudełko, 500 szt./karton
05.1147.020	Monovette® do gazometrii krwi 2 ml, pojedyncza, sterylna	100 szt./pudełko, 500 szt./karton
05.1147.048	Monovette® do gazometrii krwi 2 ml, filtr zamontowany, pojedyncza, sterylna	100 szt./torba, 500 szt./karton
14.1148	Filtr odpowietrzający	100 szt./torba, 500 szt./karton

Kapilary z tworzywa sztucznego do gazometrii krwi



Nr katalogowy	Nazwa	Ø / długość w mm	Opakowanie
19.930.100	kapilary do gazometrii krwi 100 µl	2,05/100	250 szt.
19.930.125	kapilary do gazometrii krwi 125 µl	2,05/110	250 szt.
19.930.140	kapilary do gazometrii krwi 140 µl	2,3/75	200 szt.
19.930.175	kapilary do gazometrii krwi 175 µl	2,3/100	200 szt.

Zestawy kapilar z tworzywa sztucznego do gazometrii krwi



Nr katalogowy	Nazwa	Opakowanie
51.931.100	zestaw kapilar do gazometrii krwi 100 µl, zatyczki i mieszadełka	1000 szt.
51.931.125	zestaw kapilar do gazometrii krwi 125 µl, zatyczki i mieszadełka	1000 szt.
51.931.140	zestaw kapilar do gazometrii krwi 140 µl, zatyczki i mieszadełka	800 szt.
51.931.175	zestaw kapilar do gazometrii krwi 175 µl, zatyczki i mieszadełka	800 szt.

Aksesoria



Nr katalogowy	Nazwa	Opakowanie
65.935.205	Zatyczka, biała do kapilary do gazometrii krwi o średnicy zewnętrznej 2,05 mm	500 szt.
65.935.230	Zatyczka, niebieska do kapilary do gazometrii krwi o średnicy zewnętrznej 2,3 mm	400 szt.
95.936	Mieszadełko, Ø 1 mm, długość 9 mm	250 szt.
95.937	Magnes stożkowy, czerwony	10 szt.

SARSTEDT Sp.z.o.o.
 ul. Warszawska 25
 Blizne Łaszczynskiego
 05-082 Stare Babice
 Tel. (022) 722-05-43 - 722-95-96
 (022) 722-95-11 - 722-01-48
 Fax. (022) 722-07-95
 info.pl@sarstedt.com
 www.sarstedt.com