

TOPSWING PRO II

Die sichere Vollblutspende mit effizientem Datenmanagement für den mobilen und stationären Spendeinsatz

NEU!



- Innovative Mischbewegung
- Großes TFT-Farbdisplay
- Modulare Aufbaucharakteristik
- Integrierte Tragelösung
- Datentransfer via USB-Stick
- WLAN-Funktechnologie
- Funkscanner



SARSTEDT

Netz- bzw. akkubetriebene Blutmischwaage für den stationären und mobilen Spendeinsatz. Vollautomatische Spendedatensicherung via WLAN, Kabelverbindung sowie USB-Stick garantiert ein optimales Datenmanagement. Durch den modularen Aufbau kann jede TOPSWING PRO II anwendungsspezifisch konfiguriert werden.


TFT-Farbdisplay

- Großes hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Kontinuierliches Spendemonitoring
- Alle Hinweise, Alarme und Bedienungsaufforderungen werden im Klartext angezeigt



Kommunikation

- Bidirektionale Kommunikation mit der Spenderdatenbank via WLAN-Funktechnologie und Kabelverbindung

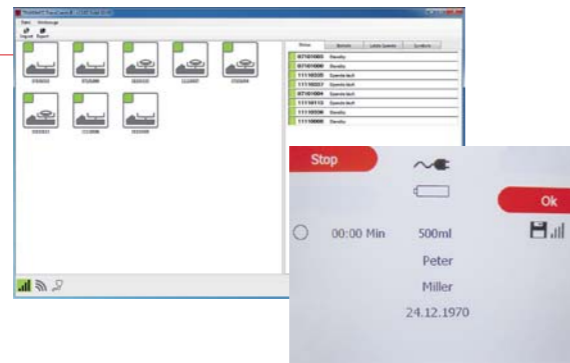

USB-Stick

- Speicherung von Daten auf mobilem Datenträger



Scanner TOUCH 65 PRO & Funkscanner CHS 7

- Einlesen von Registrierungsdaten



Mischschale

- Große Mischschale mit Staufächern für Inline-Filter
- Automatische Beutelerkennung
- Schockgewichtsfunktion



Schlauchklemme

- Fingerschutz durch Kapselung
- Automatische Schlauchererkennung
- Entnahme der Schlauchklemme ohne Werkzeug



TS Level XL

- Höhenanpassung von TOPSWING PRO II während der Spende

TS Power-Pack Li-Ion

- Mobile Energieversorgungseinheit mit intelligentem Laderegler und Kapazitätsanzeige
- Bis zu 15 Std. Dauerbetrieb möglich



Modulare Aufbautechnik

- Erweiterung des Basisgeräts TOPSWING PRO II durch optional erhältliche Module:
 - TS-Transport
 - TS-Seal
 - TS-Power-Pack Li-Ionen
- Kaskadierbar



Bestellinformation

Bestell-Nummer	Bezeichnung
97.8700.410	TOPSWING PRO II - Mit 2 x Anschluss für Scanner, 3 x USB, 1 x RS-232 - Netzunabhängiger Betrieb über Li-Ion Akkutechnologie - Spendedatensicherung per USB-Stick, RS-232 und Funk
97.8700.420	TS-Power Charger Ladestation inkl. Netzkabel - Ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Laden von bis zu 12 TS-Power-Packs Li-Ion, unabhängig vom Ladezustand der TS-Power-Packs Li-Ion
97.8700.423	TS-Power-Pack Li-Ion Mobile Energieversorgungseinheit mit integrierter Ladeschaltung und Anschluss für Modul TS-Power-Pack - Ermöglicht den netzunabhängigen Betrieb von TOPSWING PRO II über das Modul TS-Power-Pack
97.8700.430	Modul TS-Power-Pack Adaptermodul zur Konnektierung von TS-Power-Pack Li-Ion mit TOPSWING PRO II - Inkl. integrierter Schublade zur Lagerung der Scanner TOUCH 65 PRO und Zubehör
97.8700.431	Modul TS-Seal Adaptermodul zur Konnektierung der integrierten Schweißzange mit TOPSWING PRO II - Inkl. Schublade zur Lagerung der Handzange, Kabel und Zubehör
97.8700.432	Modul TS-Transport Lager- und Transportabdeckung für TOPSWING PRO II - Stapelbar, ermöglicht Höhenanpassung von TOPSWING PRO II während der Spende
97.8700.433	Modul TS-Level Ermöglicht Höhenanpassung von TOPSWING PRO II während der Spende
97.8700.435	Modul TS-Level XL Ermöglicht Höhenanpassung von TOPSWING PRO II während der Spende durch Stelzen
97.8700.440	Scanner TOUCH 65 PRO Barcodescanner mit Anschluss für TOPSWING PRO II
97.8700.441	Funk-Scanner CHS 7 Kabelloser verschleißfrei arbeitender Bluetooth Barcode Scanner
97.8700.445	USB-Stick Mobiler Datenträger 1 GB
97.8700.450	TS-Script-Manager - Erlaubt die komfortable Einstellung der TOPSWING PRO II sowie die Konfiguration der Scansequenz während der Spende - Inkl. Installations-CD für Windows
97.8700.452	TRANSComm II - Ermöglicht den Datenaustausch zwischen TOPSWING PRO II und PC - Inkl. Installations-CD für Windows
97.8700.453	Kundenspezifische TS-Software Individuelle Anpassung der TS-Software an die Erfordernisse des Anwenders
97.8700.466	TS-Datenkabel RS-232 3 m Zur Verbindung von PC und TOPSWING PRO II über die Schnittstelle RS-232
97.8700.238	16 Port RS-232 Schnittstellenmodul Kommunikation mit bis zu 16 TOPSWING PRO II über eine serielle Schnittstelle des Host Rechners
97.8700.980	Kalibriergewicht 500 g Präzisionsgewicht Klasse M1 zur Gewichtskalibrierung

Vertrieb durch:

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305-0
Telefax +49 22 93 305-3450
☎ Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305-0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com