


# UM 500 – Le système de mesure de la diurèse



- Un mode d'établissement convivial et exact du bilan urinaire qui garantit une sécurité hygiénique optimale

Sécurité hygiénique

La chambre Pasteur intégrée à prise d'air antibactérienne et valve anti-reflux à membrane, allée à une valve ❶ anti-reflux supplémentaire dans la poche de recueil des urines, garantit la sécurité hygiénique et prévient la migration bactérienne rétrograde.

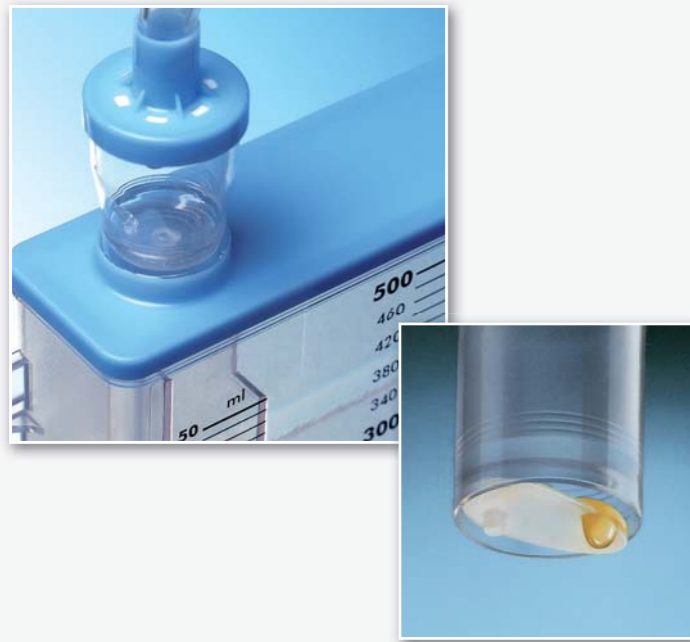

Fixation individuelle

Une lanière de fixation élastique à trous ou bien un crochet spécial pour glissière (Dräger) assure une fixation du système sûre et individuelle.



Vidange rapide


L'association d'une valve rotative grand calibre facile à manier et d'une compensation de la pression optimale du système (prise d'air anti-bactérienne de la chambre Pasteur, chambre de mesure et poche de ❷ recueil des urines) garantit une vidange rapide de la chambre de mesure.













Lecture précise

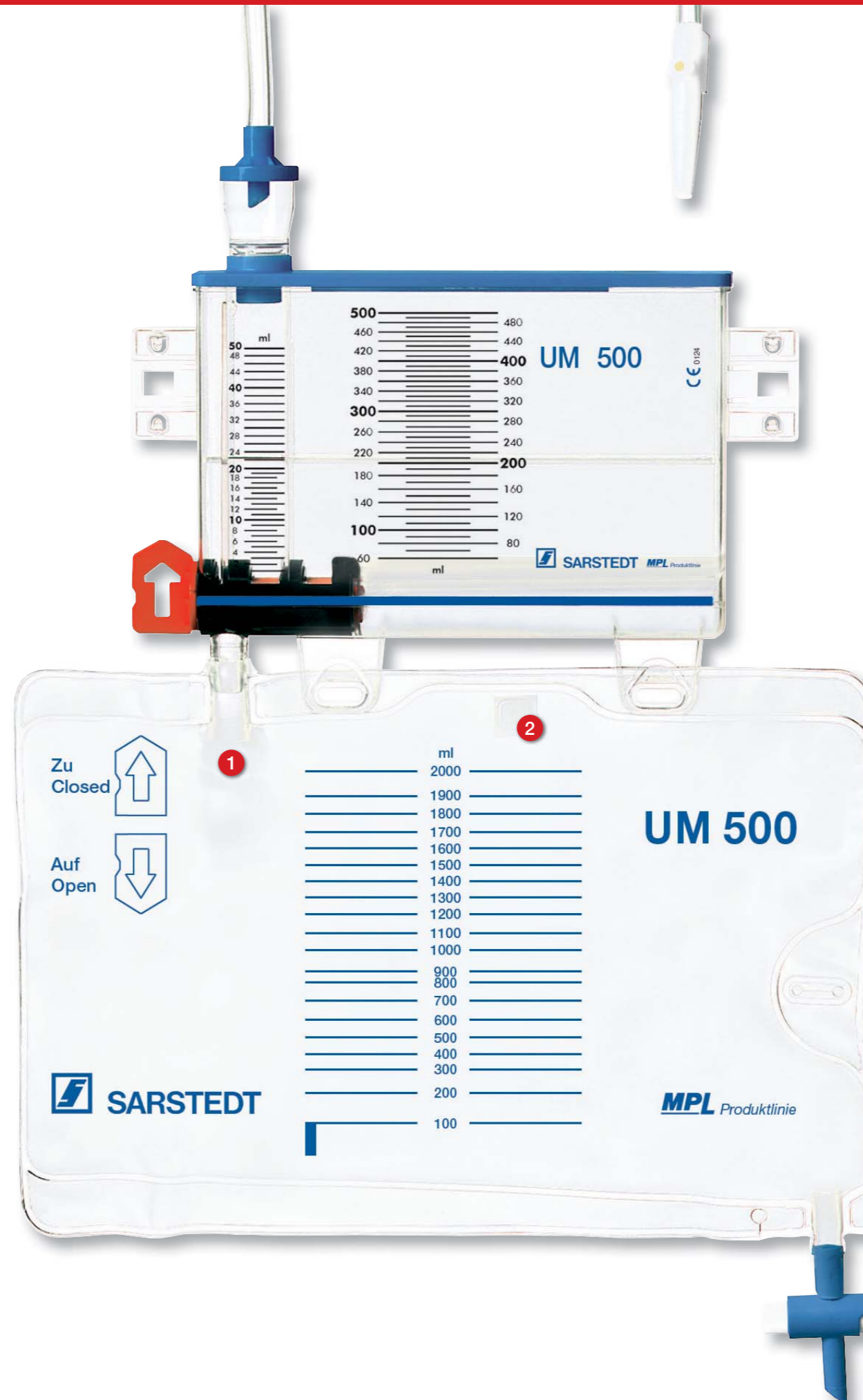La graduation de précision facilement lisible garantit la mesure des quantités minimales au millimètre près. Le volume total de mesure de 500 ml ainsi que la graduation précise et claire permettent de faire un bilan liquidien exact, même en cas de taux d'excrétion urinaire élevés.

Les volumes d'urine dépassant 500 ml sont dirigés automatiquement dans la poche de recueil grâce au dispositif de trop-plein.

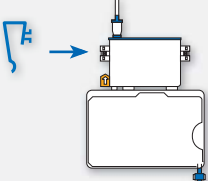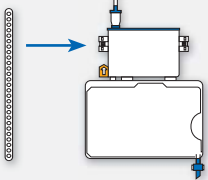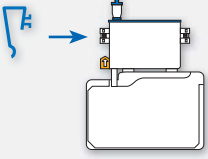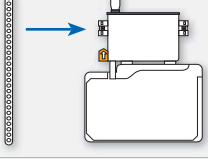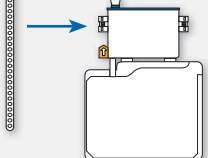

# Informations de commande UM 500

	Désignation	Référence	UV / quantité
	Système de mesure de la diurèse UM 500 équipé d'une <b>poche à urine avec robinet de vidange</b> de 2.000 ml Crochet de fixation pour glissières  <i>emballage individuel, stérile</i>	74.5610.100	15
	Système de mesure de la diurèse UM 500 équipé d'une <b>poche à urine avec robinet de vidange</b> de 2.000 ml Lanière de fixation à trous  <i>emballage individuel, stérile</i>	74.5610.200	15
	Système de mesure de la diurèse UM 500 équipé d'une <b>poche de recharge</b> de 1.800 ml Crochet de fixation pour glissières  <i>emballage individuel, stérile</i>	74.5620.100	15
	Système de mesure de la diurèse UM 500 équipé d'une <b>poche de recharge</b> de 1.800 ml Crochet de fixation pour glissières  <i>emballage individuel, stérile</i>	74.5620.200	15
	Système de mesure de la diurèse UM 500 équipé d'une <b>poche de recharge</b> de 3.000 ml Lanière de fixation à trous  <i>emballage individuel, stérile</i>	74.5630.200	15
	Poche de recharge, 1.800 ml  <i>emballage individuel, stérile</i>	74.5622.005	100
	Poche de recharge, 3.000 ml  <i>emballage individuel, stérile</i>	74.5624.005	100
	Poche de recharge, 2.000 ml, avec robinet de vidange  <i>emballage individuel, stérile</i>	74.5623.005	100
	Lanières de fixation de recharge	74.5763.010	50
	Fixation supplémentaire pour barres de lit larges	74.5650.010	150

SARSTEDT France  
Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay  
Tél.: 03 84 31 95 95  
Fax: 03 84 31 95 99  
info.fr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com