

# Ανάλυση ούρων

Ολοκληρωμένες λύσεις για τη δειγματοληψία



# SARSTEDT International

Ο παγκόσμιος συνεργάτης σας στην ιατρική και την επιστήμη



Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



**«Ο Ιπποκράτης εξέταζε την οσμή και το χρώμα των ούρων από το 400 π.Χ. και ακόμη και σήμερα η ανάλυση των ούρων έχει κεντρικό ρόλο στη διαγνωστική εξέταση.»**

Η Sarstedt, ως κατασκευαστής με εμπειρία δεκαετιών στην τεχνολογία των διαγνωστικών προϊόντων, έχει αναπτύξει προϊόντα υψηλής ποιότητας για τη διάγνωση ούρων. Για την κατασκευή χρησιμοποιούμε μόνο επιλεγμένα υλικά, τα οποία είναι ιδανικά κατάλληλα για την εκπλήρωση των προ-αναλυτικών απαιτήσεων σχετικά με τη συλλογή, τη μεταφορά, τη φύλαξη και την προετοιμασία δειγμάτων ανθρώπινου ή κτηνιατρικού υλικού προς εξέταση. Όσον αφορά τη λειτουργικότητά τους, τα προϊόντα ταιριάζουν ιδανικά στις εξατομικευμένες δυνατότητες εφαρμογής ενός σύγχρονου εργαστηρίου.


Η διάγνωση ούρων εξακολουθεί να αποτελεί μια γρήγορη και αξιόπιστη μέθοδο εξέτασης. Οι εκτεταμένες μέθοδοι ανίχνευσης απαιτούν για την διεξαγωγή αξιόπιστων εξετάσεων προσεκτική και κατάλληλη για εφαρμογές ρουτίνας προ-ανάλυση.

Η Sarstedt θα χαρεί να σας υποστηρίξει!

## Monovette® ούρων – Εργασία με υγιεινό τρόπο και χωρίς βελόνες

Η κατάλληλη για εφαρμογές ρουτίνας και διεξοδική προ-ανάλυση αποτελεί τη βάση κάθε προσεκτικά διενεργούμενης ανάλυσης ούρων. Η εργασία με το Monovette® ούρων, η οποία γίνεται χωρίς καμία βελόνα και με υγιεινό τρόπο, αυξάνει επιπλέον την ασφάλεια για τον ασθενή και τον χρήστη.

### Υγιεινή συλλογή και μεταφορά δειγμάτων

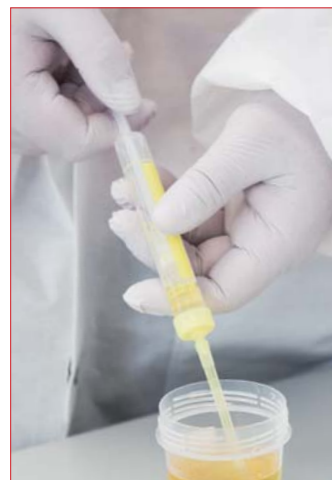

Το δείγμα ούρων λαμβάνεται με υγιεινό τρόπο από ένα δοχείο συλλογής με τη χρήση του παρεχόμενου ρύγχους αναρρόφησης. Με την ήπια αναρρόφηση διατηρούνται επίσης τα ιδιαίτερως ευαίσθητα συστατικά του ιζήματος ούρων όπως π.χ. κύλινδροι ούρων, για μικροσκοπική αξιολόγηση.

### Συλλογή δειγμάτων χωρίς βελόνα



Η δειγματοληψία χωρίς βελόνα από ένα κλειστό σύστημα αποστράγγισης ούρων αυξάνει την ασφάλεια για τον ασθενή και το νοσηλευτικό προσωπικό.

### Δοχείο για ταινίες εξέτασης ούρων



Οι ταινίες εξέτασης που κυκλοφορούν στο εμπόριο για τη χημική ανάλυση ούρων μπορούν εύκολα να βυθιστούν στις γεμάτες Monovette® ούρων.

### Σωληνάρια φυγοκέντρησης για τη λήψη ιζήματος




Η απευθείας χρήση ως σωληνάρια φυγοκέντρησης μειώνει τον χρόνο ανάλυσης. Εφόσον το υπερκείμενο μεταγιστεί, το έμβολο μπορεί να ωθηθεί πάλι προς τα επάνω και το ιζήμα να ληφθεί με υγιεινό τρόπο.

### Δοχείο για συσκευή ανάλυσης



Η Monovette® ούρων, η οποία διατίθεται σε πολλαπλές παραλλαγές, βελτιστοποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες εργασίας και εντάσσεται ιδανικά και σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες ανάλυσης ούρων.

### Απόρριψη που εξοικονομεί κόστος

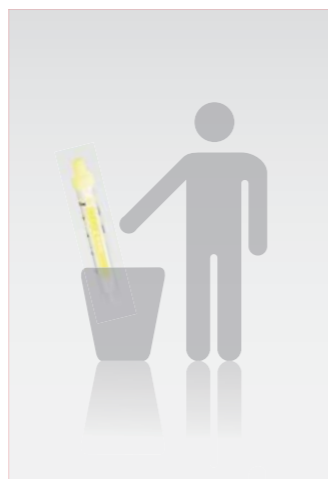

Δεν απαιτούνται δοχεία ανθεκτικά σε διάτρηση για τη σωστή απόρριψη των Monovette® ούρων μετά τη χρήση.

Φωτογραφία: Ronald Bonss

## Monovette® ούρων

### εργασία με υγιεινό τρόπο

- Το παρεχόμενο ρύγχος αναρρόφησης επιτρέπει την υγιεινή αναρρόφηση ούρων από ένα δοχείο συλλογής
- Η βύθιση των ταινιών εξέτασης που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την ανάλυση ούρων μπορεί να γίνει απευθείας στην γεμάτη Monovette® ούρων
- Η Monovette® ούρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη ιζήματος στη φυγόκεντρο
- Κατάλληλη για μεταφορά και αποστολή σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας P650 των ADR και IATA

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm | Τύπος  | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 10.250.001      | PP    | 3,2         | 75/13                    | Χάρτινη ετικέτα  | 512                      |
| 10.258          | PP    | 8,5         | 92/15                    | ---  | 512                      |
| 10.258.020      | PP    | 8,5         | 92/15                    | ατομικά συσκευασμένα, αποστειρωμένα                              | 500                      |
| 10.252          | PP    | 10          | 102/15                   | ---  | 512                      |
| 10.252.001      | PP    | 10          | 102/15                   | Χάρτινη ετικέτα  | 512                      |
| 10.252.030      | PP    | 10          | 102/15                   | λευκό, προστασία από UV ακτινοβολία                              | 512                      |
| 10.252.020      | PP    | 10          | 102/15                   | ατομικά συσκευασμένα, αποστειρωμένα                              | 500                      |
| 10.252.028      | PP    | 10          | 102/15                   | με προσαρμογέα Luer-Lock, (χωρίς Εικόνα) διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ | 100                      |

### Ατομικά συσκευασμένα ρύγχη αναρρόφησης

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Μήκος σε mm | Ø σε mm | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|---------|--------------------------|
| 10.251          | PP    | 76          | 8       | 5.000                    |

PP = Πολυπροπυλένιο



## Ανάλυση ούρων με σταθεροποιητή

Για τη βακτηριολογική εξέταση ούρων, η Μονovette® ούρων με βορικό οξύ παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της Μονovette® ούρων σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική σταθεροποίηση των μικροοργανισμών που υπάρχουν στα ούρα.



Το δείγμα ούρων λαμβάνεται με υγιεινό τρόπο με τη χρήση του παρεχόμενου ρύγχους αναρρόφησης έως τη σήμανση πλήρωσης. Λόγω της άμεσης βακτηριοστατικής δράσης, σταθεροποιείται σημαντικά ο αριθμός βακτηρίων των συνηθέστερων παραγόντων των ουρολοιμώξεων. Το δείγμα ούρων μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί σε θερμοκρασία δωματίου και παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα μικροβιολογικών δοκιμών έως και 48 ώρες μετά τη συλλογή.

Περαιτέρω βιβλιογραφία σχετικά με τη σταθεροποιητική δράση των Μονovette® ούρων με βορικό οξύ θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com).



## Μονovette® ούρων με σταθεροποιητή\*

- Για τη σταθεροποίηση των μικροοργανισμών απευθείας μετά τη συλλογή των δειγμάτων για έως και 48 ώρες
- Η βακτηριοστατική δράση του βορικού οξέος στους σημαντικότερους παράγοντες των ουρολοιμώξεων έχει αποδειχθεί πολλές φορές
- Συνδυασμένη λήψη ούρων και μεταφορά δειγμάτων σε ένα δοχείο

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/ Ø σε mm | Τύπος  | Συσκευασία τεμάχια/ κουτί |
|-----------------|-------|-------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 10.253          | PP    | 10          | 102/15                    | ---  | 512                       |
| 10.253.001      | PP    | 10          | 102/15                    | Χάρτινη ετικέτα                                      | 512                       |
| 10.253.020      | PP    | 10          | 102/15                    | ατομικά συσκευασμένα, αποστειρωμένα                  | 500                       |
| 10.253.021      | PP    | 10          | 102/15                    | Χάρτινη ετικέτα, ατομικά συσκευασμένα, αποστειρωμένα | 500                       |

## Ατομικά συσκευασμένα ρύγχη αναρρόφησης

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Μήκος σε mm | Ø σε mm | Συσκευασία τεμάχια/ κουτί |
|-----------------|-------|-------------|---------|---------------------------|
| 10.251          | PP    | 76          | 8       | 5.000                     |

## Σωληνάριο ούρων με σταθεροποιητή\*

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/ Ø σε mm | Τύπος   | Συσκευασία τεμάχια/ κουτί |
|-----------------|-------|-------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 51.9923.830     | PP    | 10          | 100/16                    | Κωνικό σωληνάριο, κόκκινο πώμα <b>διαθέσιμο μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο</b> | 1.000                     |
| 51.9923.820     | PP    | 30          | 90/25                     | Κωνικός πυθμένας και στεφάνη στήριξης, κόκκινο πώμα                       | 500                       |

## V-Monovette® ούρων με σταθεροποιητή\*

| Αρ. παραγγελίας | Material | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/ Ø σε mm | Τύπος  | Συσκευασία τεμάχια/ κουτί |
|-----------------|----------|-------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 11.2253.001     | PET      | 4           | 75/13                     | Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα | 500                       |
| 11.2453.001     | PET      | 10          | 100/15                    | Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα | 500                       |

PP = Πολυπροπυλένιο, PET = Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο  
\* Η συγκέντρωση βορικού οξέος ανέρχεται σε 1,5% για τον αντίστοιχο ονομαστικό όγκο



## Το σύστημα κενού για την κλειστή μεταφορά ούρων

Υγιεινή και άνεση για τον ασθενή και τον χρήστη. Το κλειστό σύστημα γύρω από την V-Monovette® ούρων θέτει τα βέλτιστα προαναλυτικά πρότυπα για την καθημερινή διάγνωση ούρων. Η εγγύηση στειρότητας και μια υγιεινή συλλογή δειγμάτων εξασφαλίζονται από την αρχή. Η μεταφορά, η αποθήκευση και οι επακόλουθες εξετάσεις στο εργαστήριο μπορούν να πραγματοποιηθούν από την V-Monovette® ούρων. Αυτό μαζί με μια σειρά δυνατοτήτων συνδυασμού διακρίνει την V-Monovette® ούρων ως μια πρακτική λύση για αξιόπιστη διάγνωση ούρων.



## Δοχείο ούρων με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς για δείγματα ούρων 20 ml

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Ύψος/Ø σε mm | Τύπος   | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|--------------|---|--------------------------|
| 75.562.400      | PP    | 100         | 72/62        | Τοποθετημένο βιδωτό καπάκι, με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς | 200                      |

## Σύστημα μεταφοράς

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό                    | Μήκος σωλήνα σε mm | Τύπος                              | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 11.1240         | PP, PE, ανοξείδωτο ασάλι | 100                | Συμβατό με κάθε V-Monovette® ούρων | 500                      |

## V-Monovette® ούρων χωρίς σταθεροποιητή

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm | Τύπος  | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 11.2252.001     | PET   | 4           | 75/13                    | Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα | 500                      |
| 11.2352.001     | PET   | 6           | 100/13                   | Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα | 500                      |
| 11.2452.001     | PET   | 10          | 100/15                   | Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα | 500                      |

## V-Monovette® ούρων χωρίς σταθεροποιητή, ιδανική για τη συλλογή ιζήματος

- Ιδανικό δοχείο φυγοκέντρησης για τη συλλογή ιζήματος
- Καλύτερο κεντράρισμα στο στατό μέσω των πτερυγίων στην περιοχή του κώνου
- Κατάλληλο για την υποδοχή μιας «πιπέτας KOVA» για την τυποποιημένη εξέταση του ιζήματος ούρων

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm | Τύπος                                       | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 11.2552.001     | PET   | 9,5         | 100/15                   | Κωνική βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα | 500                      |

PP = Πολυπροπυλένιο, PE = Πολυαιθυλένιο, PET = Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο

## V-Monovette® ούρων με σταθεροποιητή

- Σταθεροποίηση μικροοργανισμών στα ούρα σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα ενός κλειστού συστήματος
- Κατά την πλήρωση έως τον ονομαστικό όγκο, τα ούρα σταθεροποιούνται αποτελεσματικά για έως και 48 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου

| Αρ. παραγγελίας | Material | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm | Τύπος  | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|----------|-------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 11.2253.001     | PET      | 4           | 75/13                    | Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα | 500                      |
| 11.2453.001     | PET      | 10          | 100/15                   | Στρογγυλή βάση, χάρτινη ετικέτα, αποστειρωμένα | 500                      |

## Φιάλη συλλογής ούρων 3 λίτρων με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς

- Άνετη ύπτια δειγματοληψία σε όγκους > 1.200 ml: Το ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς βρίσκεται πάντα στην αντίθετη πλευρά της λαβής.
- Είναι δυνατή η δειγματοληψία ανάποδα για μικρούς όγκους από 700 ml
- Εργονομική εσοχή λαβής για ασφαλή χειρισμό
- Διαφανείς λωρίδες οπτικού ελέγχου με διαβάθμιση σε βήματα των 100 ml
- Μεγάλη διάμετρος ανοίγματος (80 mm)

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Άνοιγμα/Ø σε mm | Τύπος  | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--|--------------------------|
| 77.575.400      | PE    | 3.000       | 80              | καφέ, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα <b>Γερμανικά</b> | 30                       |
| 77.575.401      | PE    | 3.000       | 80              | καφέ, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα <b>Αγγλικά</b>   | 30                       |
| 77.575.402      | PE    | 3.000       | 80              | καφέ, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP με ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα <b>Γαλλικά</b>   | 30                       |

PET = Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, PE = Πολυαιθυλένιο



## UriSet 24

Το ολοκληρωμένο σετ για την τυποποιημένη και φιλική για τον ασθενή συλλογή ούρων 24ώρου



- 1 Φιάλη συλλογής**  
Με όγκο 3.000 ml, εργονομική λαβή, μεγάλη διάμετρο ανοίγματος 80 mm και διαφανείς λωρίδες οπτικού ελέγχου με διαβάθμιση σε βήματα των 100 ml για τη βέλτιστη ανάγνωση της ποσότητας πλήρωσης
- 2 Δοχείο συλλογής και μετάγγισης**  
Το ενσωματωμένο δοχείο συλλογής ούρων επιτρέπει μια φιλική για τον ασθενή συλλογή καθώς και μια υγιεινή μετάγγιση των ούρων από τη φιάλη συλλογής στο δοχείο μεταφοράς.
- 3 Σταθεροποιητής**  
Το υδροχλωρικό οξύ (9 ml 20%) που περιλαμβάνεται στο σετ έχει προδοσολογηθεί σε μια γυάλινη φιάλη με σταγονόμετρο ασφαλείας. Πλεονεκτήματα - κανένα πρόσθετο βήμα εργασίας και αυξημένη ασφάλεια του ασθενούς. Η ποσότητα και η συγκέντρωση του υδροχλωρικού οξέος έχει επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να σταθεροποιεί με βέλτιστο τρόπο τα ούρα για έως και 7 ημέρες για την ανάλυση, μεταξύ άλλων, των κατεχολαμινών, των μετανεφρινών, του βανιλομανδελικού οξέος, του ομοβανλικού οξέος και του 5-υδροξυϊνδολεξικού οξέος. Αυτή η μακροχρόνια σταθεροποίηση σε θερμοκρασία δωματίου επιτρέπει τη συγκέντρωση δειγμάτων στο εργαστήριο και συνεπώς μια αποτελεσματική επεξεργασία κατά παρτίδες.
- 4a Δοχείο μεταφοράς ή 4b Monovette ούρων®**  
Μόνο το συνοδευτικό δοχείο 30 ml ή το Monovette ούρων® φθάνει στον γιατρό ή στο εργαστήριο. Η φιάλη συλλογής ούρων μένει για απόρριψη στον ασθενή. Για την ασφαλή αντιστοίχιση των ασθενών συμπεριλαμβάνεται με το δοχείο μεταφοράς μια αυτοκόλλητη ετικέτα. Οι φωτοευαίσθητοι δείκτες π.χ. πορφυρίνες φθάνουν με ασφάλεια στην ανάλυση λόγω της ενσωματωμένης προστασίας του δοχείου από UV ακτινοβολία.

## Παραλλαγές UriSet 24

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Τύπος  | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|--|--------------------------|
| 77.578          | PE    | με σταθεροποιητή και δοχείο μεταφοράς 30 ml                                  | 30                       |
| 77.578.252      | PE    | με σταθεροποιητή και λευκή (προστασία από UV ακτινοβολία) Monovette® ούρων   | 30                       |
| 77.578.010      | PE    | χωρίς σταθεροποιητή με λευκή (προστασία από UV ακτινοβολία) Monovette® ούρων | 30                       |

## Επιμέρους εξαρτήματα του UriSet 24

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος  | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--|--------------------------|
| 75.1356         | PP    | 500         | 148/80          | Δοχείο συλλογής ούρων με άνοιγμα 80 mm, φυσικό                             | 250                      |
| 10.252.030      | PP    | 10          | 102/15          | Monovette® ούρων λευκή (προστασία από UV ακτινοβολία)                      | 512                      |
| 62.543.030      | PP    | 30          | 107/25          | Δοχείο μεταφοράς 30 ml λευκό (προστασία από UV ακτινοβολία) με βιδωτό πώμα | 500                      |

PE = Πολυαιθυλένιο, PP = Πολυπροπυλένιο

## Φιάλες συλλογής ούρων

- Όγκος πλήρωσης 3.000 ml, 2.000 ml, 500 ml και 250 ml
- Εργονομική εσοχή λαβής για ασφαλή χειρισμό της φιάλης συλλογής 3 l
- Μεγάλη διάμετρος ανοίγματος

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Άνοιγμα / Ø σε mm | Τύπος   | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-------------------|---|--------------------------|
| 77.575          | PE    | 3.000       | 80                | καφέ με λωρίδες οπτικού ελέγχου και διαβάθμιση 100 ml, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα <b>Γερμανικά</b> | 30                       |
| 77.575.001      | PE    | 3.000       | 80                | καφέ με λωρίδες οπτικού ελέγχου και διαβάθμιση 100 ml, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα <b>Αγγλικά</b>   | 30                       |
| 77.580          | PE    | 2.000       | 80                | καφέ με διαβάθμιση 100 ml, κίτρινο βιδωτό καπάκι από PP, τοποθετημένο, συνοδευτική αυτοκόλλητη ετικέτα στα <b>Αγγλικά/Γερμανικά</b>                     | 30                       |
| 77.582          | PE    | 500         | 42                | καφέ, μαύρο βιδωτό καπάκι από HD-PE, τοποθετημένο   | 100                      |
| 77.577          | PE    | 250         | 35                | λευκό, μαύρο βιδωτό καπάκι από HD-PE, τοποθετημένο  | 120                      |

## Αυτοκόλλητη ετικέτα για φιάλη συλλογής ούρων

για 77.575, 77.575.400 και 77.580

| Αρ. παραγγελίας | Διαστάσεις σε mm | Τύπος                        | Συσκευασία                                 |
|-----------------|------------------|------------------------------|--|
| 84.1402         | 150 x 55         | Ετικέτα στα <b>Γερμανικά</b> | 300/εσωτερική συσκευασία (10 x 30/σακούλα) |
| 84.1402.001     | 150 x 55         | Ετικέτα στα <b>Αγγλικά</b>   | 300/εσωτερική συσκευασία (10 x 30/σακούλα) |
| 84.1402.002     | 150 x 55         | Ετικέτα στα <b>Γαλλικά</b>   | 300/εσωτερική συσκευασία (10 x 30/σακούλα) |
| 84.1402.003     | 150 x 55         | Ετικέτα στα <b>Ολλανδικά</b> | 300/εσωτερική συσκευασία (10 x 30/σακούλα) |

PE = Πολυαιθυλένιο, HD-PE = Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο



Δοχείο ούρων

Η επιλογή φιλικών για τον χρήστη δοχείων ούρων πληροί όλες τις απαιτήσεις για τη συλλογή, τη μεταφορά και την αποθήκευση δειγμάτων ούρων. Οι διάφοροι όγκοι καθώς και οι παραλλαγές πιεστών και βιδωτών καπακιών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων λύσεων.



Δοχείο 70 ml υψηλής διαφάνειας με βιδωτό καπάκι από HD-PE κίτρινο

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος  | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--|------|--------------------------|
| 75.9922.744     | PP    | 70          | 55/44           | Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι   | ①    | 500                      |
| 75.9922.745     | PP    | 70          | 55/44           | Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι, με ετικέτα                                     | ③    | 500                      |
| 75.9922.721     | PP    | 70          | 55/44           | Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο με ετικέτα | ③    | 200                      |

Δοχείο 90 ml διαφανές με βιδωτό καπάκι από HD-PE φυσικό

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος  | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--|------|--------------------------|
| 75.1435.002     | PP    | 90          | 65/60           | Κύπελλο με συναρμολογημένο βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, με ετικέτα ασφαλείας και σύστημα απόδειξης κλεισίματος διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ | ⑬    | 400                      |

Δοχείο 100 ml διαφανές με βιδωτό καπάκι από HD-PE φυσικό

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος   | Εικ. | Συσκευασία σακούλα/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|---|------|--------------------------|
| 75.562.105      | PP    | 100         | 73/62           | Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι, αποστειρωμένο, με ετικέτα ασφαλείας | ⑤    | 5/200                    |
| 75.562.005      | PP    | 100         | 73/62           | Δοχείο με τοποθετημένο βιδωτό καπάκι                                      | ⑥    | 5/200                    |
| 75.562.300      | PP    | 100         | 72/62           | Δοχείο με συνοδευτικό βιδωτό καπάκι                                       | ⑥    | 50/250                   |
| 75.563          | PP    | 100         | 72/62           | Ξεχωριστό δοχείο χωρίς βιδωτό καπάκι                                      | ⑥    | 50/500                   |
| 76.564          | HD-PE | -           | 14/62           | Ξεχωριστό βιδωτό καπάκι   | ⑥    | 50/500                   |

Δοχείο 100 ml διαφανές με βιδωτό καπάκι από HD-PE πράσινο

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος                               | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 75.1354.001     | PP    | 100         | 74/58           | Δοχείο με συνοδευτικό βιδωτό καπάκι | ④    | 500                      |

HD-PE = Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, PP = Πολυπροπυλένιο



Δοχείο 100 ml καφέ με βιδωτό καπάκι από HD-PE καφέ

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος                               | Εικ. | Συσκευασία σακούλα/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------|--------------------------|
| 75.562.011      | PP    | 100         | 72/62           | Δοχείο με συνοδευτικό βιδωτό καπάκι | ②    | 50/250                   |

Δοχείο 100 ml και 250 ml λευκό

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος  | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--|------|--------------------------|
| 75.560          | PS    | 250         | 100/73          | Δοχείο ξεχωριστό χωρίς κουμπωτό καπάκι, κατάλληλο κουμπωτό καπάκι από διαφανές PS 76.561 (500 τεμάχια)   | ⑩    | 500                      |
| 75.570          | PS    | 100         | 49/70           | Δοχείο ξεχωριστό χωρίς κουμπωτό καπάκι, κατάλληλο κουμπωτό καπάκι από διαφανές PS 76.571 (1.000 τεμάχια) | ⑦    | 1.000                    |

Δοχείο 125 ml υψηλής διαφάνειας με κουμπωτό καπάκι από PE κόκκινο

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος  | Εικ. | Συσκευασία σακούλα/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--|------|--------------------------|
| 75.1355         | PP    | 125         | 67/66           | Δοχείο ξεχωριστό χωρίς κουμπωτό καπάκι                         | ⑨    | 50/1.000                 |
| 76.1477         | PE    | -           | -               | Κουμπωτό καπάκι κόκκινο με στόμιο για δοχείο 125 ml 75.1355    | ⑨    | 1.000/1.000              |
| 76.1477.100     | PE    | -           | -               | Κουμπωτό καπάκι κόκκινο με στόμιο για δοχείο 125 ml 75.1355    | ⑨    | 100/1.000                |
| 76.1414         | PE    | -           | -               | Κουμπωτό καπάκι κόκκινο χωρίς στόμιο για δοχείο 125 ml 75.1355 | ⑪    | 1.000/1.000              |
| 76.1414.100     | PE    | -           | -               | Κουμπωτό καπάκι κόκκινο χωρίς στόμιο για δοχείο 125 ml 75.1355 | ⑪    | 100/1.000                |

Δοχείο 125 ml διαφανές

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος                                  | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|--|------|--------------------------|
| 75.565          | PP    | 125         | 85/62           | Δοχείο ξεχωριστό χωρίς κουμπωτό καπάκι | ⑫    | 500                      |

Δοχείο 500 ml φυσικό

Για τη λήψη ούρων κατά τη συλλογή ούρων 24 ώρου

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος / Ø σε mm | Τύπος   | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|-----------------|---|------|--------------------------|
| 75.1356         | PP    | 500         | 148/80          | Δοχείο συλλογής ούρων με άνοιγμα 80 mm, φυσικό (βλ. σελ. 10 «Επιμέρους εξαρτήματα») | ⑧    | 250                      |


PS = Πολυστυρένιο, PP = Πολυπροπυλένιο, PE = Πολυαιθυλένιο



Σωληνάρια με κωνικό πυθμένα, στεφάνη στήριξης και βιδωτό πώμα

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm | Τύπος   | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|--------------------------|---|------|--------------------------|
| 60.9921.821     | PS    | 10          | 97/16                    | Πώμα φυσικό, συνοδευτικό  | ⑧    | 500/σακούλα 1.000/κουτί  |
| 60.9921.830     | PS    | 10          | 97/16                    | Πώμα, κίτρινο, τοποθετημένο   | ⑦    | 100/σακούλα 1.000/κουτί  |
| 60.9921.829     | PS    | 10          | 97/16                    | Πώμα κίτρινο, τοποθετημένο, αποστειρωμένο                                   | ⑦    | 100/σακούλα 1.000/κουτί  |
| 60.732          | PP    | 15          | 76/20                    | Πώμα φυσικό, συνοδευτικό  | ⑤    | 100/σακούλα 500/κουτί    |
| 60.732.001      | PP    | 15          | 76/20                    | Πώμα φυσικό, τοποθετημένο, αποστειρωμένο                                    | ⑤    | 100/σακούλα 500/κουτί    |
| 60.9922.241     | PP    | 25          | 90/25                    | Πώμα φυσικό, τοποθετημένο   | ④    | 500/σακούλα 500/κουτί    |
| 63.9922.252     | PP    | 25          | 90/25                    | Πώμα φυσικό, τοποθετημένο, με ετικέτα                                       | ②    | 500/σακούλα 500/κουτί    |
| 60.9922.243     | PP    | 25          | 90/25                    | Πώμα κίτρινο, τοποθετημένο, αποστειρωμένο                                   | ③    | 500/σακούλα 500/κουτί    |
| 63.9922.248     | PP    | 25          | 90/25                    | Πώμα κίτρινο, τοποθετημένο, με ετικέτα, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία | ①    | 1/σακούλα 300/κουτί      |
| 63.9922.254     | PP    | 25          | 90/25                    | Πώμα κίτρινο, τοποθετημένο, με ετικέτα, αποστειρωμένο                       | ①    | 500/σακούλα 500/κουτί    |
| 62.543          | PP    | 30          | 107/25                   | Πώμα φυσικό, τοποθετημένο, με τυπωμένη διαβάθμιση                           | ⑥    | 125/σακούλα 500/κουτί    |
| 62.543.001      | PP    | 30          | 107/25                   | Πώμα φυσικό, τοποθετημένο, αποστειρωμένο, με τυπωμένη διαβάθμιση            | ⑥    | 50/σακούλα 400/κουτί     |

PS = Πολυστυρένιο, PP = Πολυπροπυλένιο

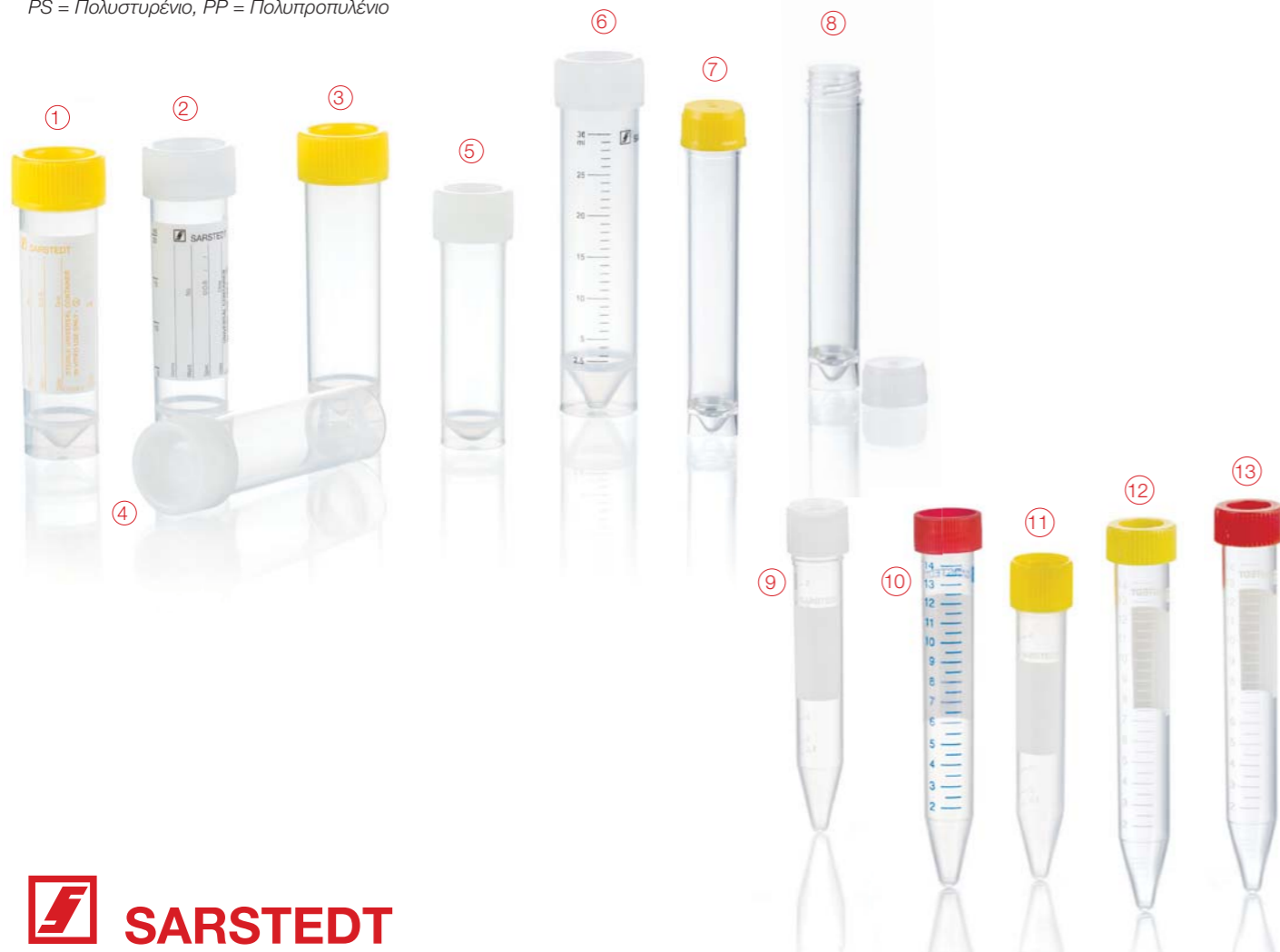

Σωληνάρια με κωνικό πυθμένα, βιδωτό πώμα

με διαβάθμιση και πεδίο επισήμανσης

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm | Τύπος   | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί |
|-----------------|-------|-------------|--------------------------|---|------|--------------------------|
| 62.9924.283     | PP    | 10          | 100/16                   | φυσικό πώμα, συνοδευτικό, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά                  | ⑨    | 500/σακούλα 1.000/κουτί  |
| 62.9924.284     | PP    | 10          | 100/16                   | κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά | ⑪    | 100/σακούλα 1.000/κουτί  |
| 62.554.001      | PP    | 15          | 120/17                   | κόκκινο πώμα, τοποθετημένο, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά                | ⑩    | 50/σακούλα 500/κουτί     |
| 62.554.502      | PP    | 15          | 120/17                   | κόκκινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά | ⑩    | 50/σακούλα 500/κουτί     |
| 62.553.041      | PS    | 15          | 120/17                   | κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, ελεύθερα DNA, ελεύθερα DNάσης/RNάσης, ελεύθερα πυρετογόνων/ενδοτοξινών, μη κυτταροτοξικά                | ⑫    | 50/σακούλα 500/κουτί     |
| 62.553.542      | PS    | 15          | 120/17                   | κίτρινο πώμα, τοποθετημένο, αποστειρωμένο,  | ⑫    | 50/σακούλα 500/κουτί     |
| 62.553.001      | PS    | 15          | 120/17                   | Κόκκινο πώμα συμπεριλαμβάνεται διαθέσιμα μόνο στις ΗΠΑ  | ⑬    | 50/σακούλα 500/κουτί     |
| 62.553.205      | PS    | 15          | 120/17                   | Κόκκινο πώμα συναρμολογημένο, αποστειρωμένο, μη πυρετογόνο / χωρίς ενδοτοξίνη διαθέσιμα μόνο στις ΗΠΑ                               | ⑬    | 50/σακούλα 500/κουτί     |

Σωληνάρια με κωνικό πυθμένα, πιεστό πώμα

| Αρ. παραγγελίας | Υλικό | Όγκος σε ml | Μήκος σωληναρίου/Ø σε mm | Τύπος  | Εικ. | Συσκευασία τεμάχια/κουτί  |
|-----------------|-------|-------------|--------------------------|--|------|---------------------------|
| 57.477          | PS    | 4,5         | 75/12                    | Σωληνάριο ξεχωριστό, κατάλληλο πώμα 65.809, 65.719   | ⑰    | 500/ 888 2.000/κουτί      |
| 57.512          | PP    | 4,5         | 75/12                    | Σωληνάριο ξεχωριστό, κατάλληλο πώμα 65.809, 65.719   | ⑮    | 1.000/σακούλα 4.000/κουτί |
| 62.9924.272     | PP    | 10          | 100/16                   | Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση και πεδίο επισήμανσης, κατάλληλο πώμα 65.793, 65.816, 65.720 | ⑭    | 100/σακούλα 1.000/κουτί   |
| 57.462          | PS    | 12          | 110/17                   | Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση, κατάλληλο πώμα 65.793, 65.816                               | ⑱    | 500/σακούλα 1.000/κουτί   |
| 57.462.015      | PS    | 12          | 110/17                   | Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση, κατάλληλο πώμα 65.793, 65.816                               | ⑱    | 250/ 888 1.000/κουτί      |
| 57.462.001      | PS    | 12          | 110/17                   | Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση, αποστειρωμένο, τοποθετημένο πώμα                            | ⑱    | 100/σακούλα 500/κουτί     |
| 57.527          | PP    | 12          | 110/17                   | Σωληνάριο ξεχωριστό με διαβάθμιση, κατάλληλο πώμα 65.793, 65.816                               | ⑰    | 500/σακούλα 1.000/κουτί   |

PS = Πολυστυρένιο, PP = Πολυπροπυλένιο, 888 = Συσκευασία στοιβας





*Εάν έχετε ερωτήσεις:  
Είμαστε στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε!*

*Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο μας στη διεύθυνση: [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)*

