

Analýza krevních plynů

Odběrové systémy pro odběry arteriální, venózní a kapilární krve.



- Arteriální a venózní odběr & příslušenství
- Kapilární odběr & příslušenství

Široký výběr technik odběru umožňuje bezpečný a hygienický odběr krve – od libovolného pacienta

Arteriální a venózní odběr & příslušenství

Menší objem vzorku

Pro analýzu krevních plynů arteriální a venózní krve je z důvodu nižšího zatížení pacientů vedle naší 2 ml verze ABR Monovette® program doplněn i o 1 ml verzi.

Přítomnost Ca²⁺ balancovaného heparinu umožňuje použití těchto systémů i k stanovení elektrolytů.




Hygienické odvzdušnění

Po odběru krve je na ABR Monovette® nasazen odvzdušňovací filtr a vzduch obsažený ve zkumavce je hygienicky a bez rizika kontaminace vytlačen do filtru.

Bez použití tampónu.

Odvzdušňovací filtr může být použit pro ruční transport k analýze.

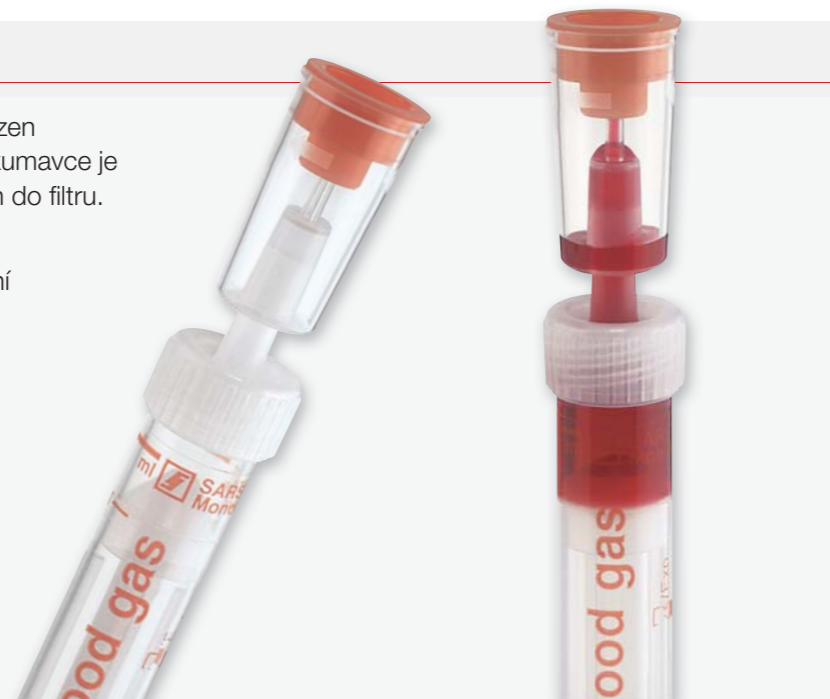

Kapilární odběr & příslušenství

Pro vzorky o malém objemu a pro optimální slučitelnost s přístroji nabízíme pro analýzu krevních plynů plastové kapiláry různých rozměrů a objemů.

Přesné výsledky


Speciální plast s nízkou propustností plynů v kombinaci s povlakem balancovaného heparinu Ca²⁺ zaručuje přesné výsledky testů.

Speciální povrchová úprava umožňuje rychlé plnění kapilár pro snadný odběr a minimální riziko srážení.



Bezpečný odběr

Netříštivý plast zabraňuje riziku poranění a infekce uživatele.

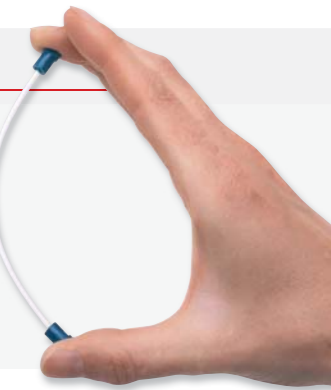

Příslušenství


Zátky

Dvě nabízené velikosti zátek zajišťují spolehlivé a bezpečné uzavření kapilár různých průměrů.



Míchací drátek a magnet

Pro optimální promíchání krevního vzorku s antikoagulantem slouží kuželkový magnet, jehož pomocí se pohybuje míchacím drátkem nahoru a dolů.

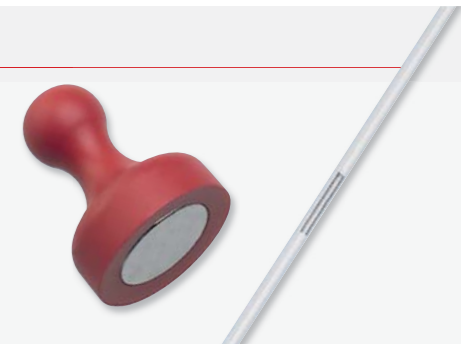

ABR Monovette®



Obj. č.	Popis	Balení
05.1146	ABR Monovette® 1 ml	50 ks/vnitřní obal, 500 ks/Karton
05.1146.020	ABR Monovette® 1 ml, individuální sterilní balení	100 ks/vnitřní obal, 500 ks/Karton
05.1147	ABR Monovette® 2 ml	50 ks/vnitřní obal, 500 ks/Karton
05.1147.020	ABR Monovette® 2 ml, individuální sterilní balení	100 ks/vnitřní obal, 500 ks/Karton
05.1147.048	ABR Monovette® s odvzdušňovacím filtrem, individuální sterilní balení	100 ks/vnitřní obal, 500 ks/Karton
14.1148	Odvzdušňovací filtr	500 ks/vnitřní obal, 1.000 ks/Karton

Plastové kapiláry na krevní plyny



Obj. č.	Popis	ø/délka v mm	Balení
19.930.100	Plastové kapiláry na krevní plyny, 100 µl	2,05/100	250 ks
19.930.125	Plastové kapiláry na krevní plyny, 125 µl	2,05/110	250 ks
19.930.140	Plastové kapiláry na krevní plyny, 140 µl	2,3/75	200 ks
19.930.175	Plastové kapiláry na krevní plyny, 175 µl	2,3/100	200 ks

Sady plastových kapilár na krevní plyny



Obj. č.	Popis	Balení
51.931.100	Sada plastových kapilár na krevní plyny, 100 µl, víčka a míchací drátky	1.000 ks
51.931.125	Sada plastových kapilár na krevní plyny, 125 µl, víčka a míchací drátky	1.000 ks
51.931.140	Sada plastových kapilár na krevní plyny, 140 µl, víčka a míchací drátky	800 ks
51.931.175	Sada plastových kapilár na krevní plyny, 175 µl, víčka a míchací drátky	800 ks

Příslušenství



Obj. č.	Popis	Balení
65.935.205	Zátka, bílá pro kapiláru na krevní plyny, vnější prům. 2,05 mm	500 ks
65.935.230	Zátka, modrá pro kapiláru na krevní plyny, vnější prům. 2,3 mm	400 ks
95.936	Míchací drátek, 1 mm, délka 9 mm	250 ks
95.937	Kuželkový magnet, červený	10 ks

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel. (00420) 281 021 491
Fax (00420) 281 021 495
sarstedt@sarstedt.cz
www.sarstedt.com