

Analýza krvných plynov

Odberové systémy na odbery krvi z tepien, žíl a kapilár



- Odbery z tepien a žíl a príslušenstvo
- Kapilárny odber a príslušenstvo

Odbery z tepien a žíl a príslušenstvo

Nižší objem vzorky


Na analýzu krvných plynov krvi zo žíl a tepien je z dôvodu nižšieho zaťaženia pacientov vedľa našej 2 ml verzie ABR Monovette® program doplnený aj o 1 ml verziu. Prítomnosť Ca^{2+} kompenzovaného Heparínu umožňuje použitie týchto systémov aj k stanoveniu elektrolytov.



Hygienické odvzdušnenie

Po odbere krvi je na ABR Monovette® nasadený odvzdušňovací filter a vzduch nachádzajúci sa v skúmavke je hygienicky a bez rizika kontaminácie vytlačený do filtra. Bez použitia tampónu.

Odvzdušňovací filter je možné použiť aj ako uzáver pre transport skúmavky k analyzátoru.

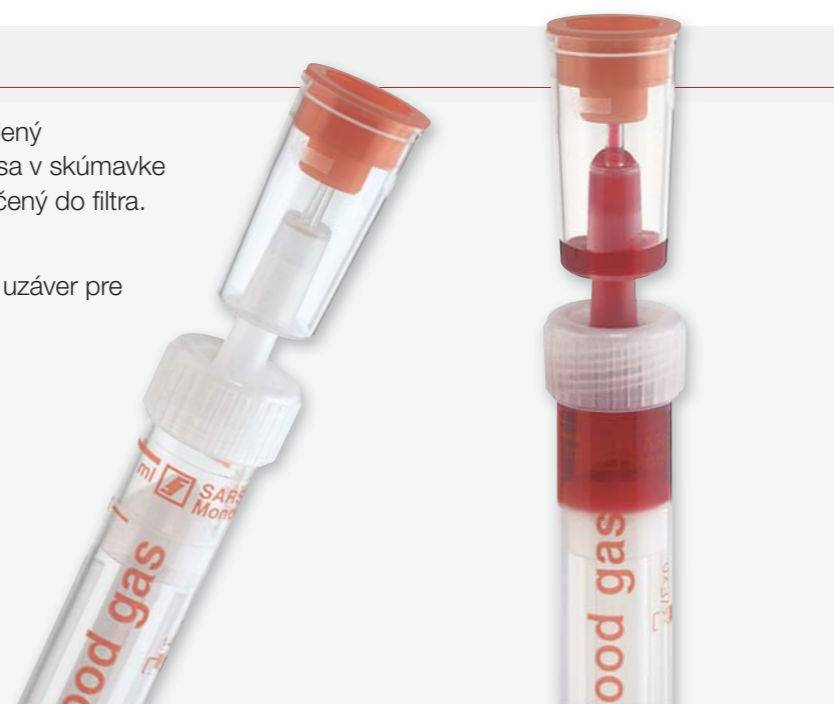

Kapilárny odber a príslušenstvo

Pre vzorky s malým objemom a pre optimálnu zlučiteľnosť s prístrojmi ponúkame na analýzu krvných plynov plastové kapiláry rôznych rozmerov a objemov.

Presné výsledky


Špeciálny plast s nízkou rozpustnosťou plynov v kombinácii s povlakom heparínu kompenzovaného Ca^{2+} zaručuje presné výsledky testov.

Špeciálna povrchová úprava umožňuje rýchle plnenie kapilár pre jednoduchý odber a minimálne riziko koagulácie.



Bezpečný odber

Nerozbitný plast zabraňuje riziku poranenia a infekcie užívateľa.

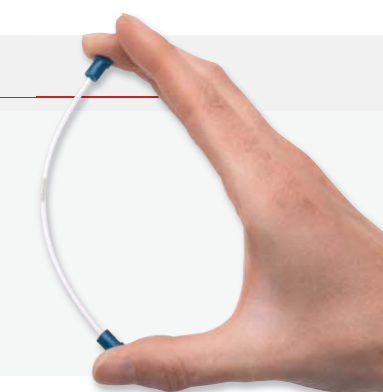

Príslušenstvo


Uzávery

Dve ponúkané veľkosti uzáverov zaisťujú spoľahlivé a bezpečné uzavretie kapilár rôznych priemerov.



Miešací drôt a magnet

Pre optimálne premiešanie krvnej vzorky s antikoagulantom slúži kužeľový magnet, s ktorého pomocou sa pohybuje miešací drôt pozdĺž kapiláry.

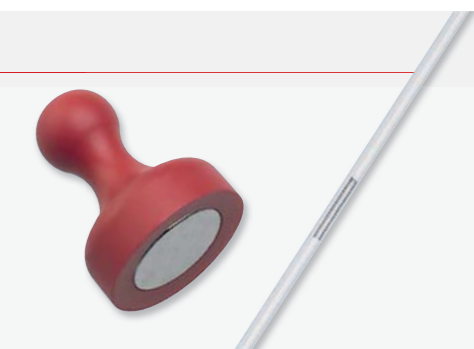

ABR Monovette®



Obj. č.	Popis	Balenie
05.1146	ABR Monovette® 1 ml	50 ks/vnútorý obal, 500 ks/kartón
05.1146.020	ABR Monovette® 1 ml, individuálne sterilne balené	100 ks/vnútorý obal, 500 ks/kartón
05.1147	ABR Monovette® 2 ml	50 ks/vnútorý obal, 500 ks/kartón
05.1147.020	ABR Monovette® 2 ml, individuálne sterilne balené	100 ks/vnútorý obal, 500 ks/kartón
05.1147.048	ABR Monovette® 2 ml, s odvzdušňovacím filtrom, individuálne sterilne balené	100 ks/vnútorý obal, 500 ks/kartón
14.1148	Odvzdušňovací filter	500 ks/vnútorý obal, 1 000 ks/kartón

Plastové kapiláry na krvné plyny



Obj. č.	Popis	ø /dĺžka v mm	Balenie
19.930.100	Plastové kapiláry na krvné plyny, 100 µl	2,05/100	250 ks
19.930.125	Plastové kapiláry na krvné plyny, 125 µl	2,05/110	250 ks
19.930.140	Plastové kapiláry na krvné plyny, 140 µl	2,3/75	200 ks
19.930.175	Plastové kapiláry na krvné plyny, 175 µl	2,3/100	200 ks

Sady plastových kapilár na krvné plyny



Obj. č.	Popis	Balenie
51.931.100	Sada plastových kapilár na krvné plyny, 100 µl, uzávery a miešacie drôty	1 000 ks
51.931.125	Sada plastových kapilár na krvné plyny, 125 µl, uzávery a miešacie drôty	1 000 ks
51.931.140	Sada plastových kapilár na krvné plyny, 140 µl, uzávery a miešacie drôty	800 ks
51.931.175	Sada plastových kapilár na krvné plyny, 175 µl, uzávery a miešacie drôty	800 ks

Príslušenstvo



Obj. č.	Popis	Balenie
65.935.205	Uzáver, biely, na kapiláru na krvné plyny, vonkajší priemer 2,05 mm	500 ks
65.935.230	Uzáver, modrý, na kapiláru na krvné plyny, vonkajší priemer 2,3 mm	400 ks
95.936	Miešací drôt, 1 mm, dĺžka 9 mm	250 ks
95.937	Kuželový magnet, červený	10 ks

SARSTEDT spol. s r. o.
 Údernícka 11
 851 01 Bratislava
 Tel: +421 268 245 933
 Fax: +421 268 245 933
 info.sk@sarstedt.com
 www.sarstedt.com