

Micro-Ago


Maneggevolezza e flusso ottimali




Micro-Ago

- Minime perdite ematiche senza alcun volume residuo nell'adattatore
- Impugnatura zigrinata per un ottimo controllo dell'ago
- Ruotabile a 360° per vene fragili
- Ottimo flusso grazie all'eccezionale qualità dell'ago e all'uscita posteriore libera



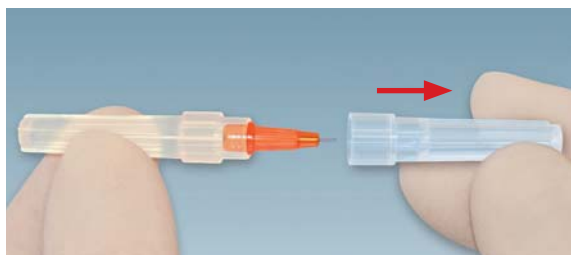

1 Rimuovere il tappo.

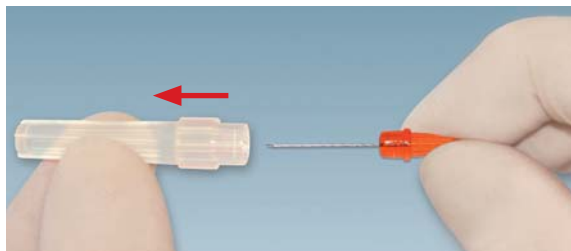

2 Estrarre il Micro-Ago dalla custodia protettiva.



3 Effettuare la venopuntura e lasciar gocciolare il sangue in una micro provetta adeguata.



4 Smaltire il Micro-Ago in un contenitore adatto per oggetti taglienti.

Con riserva di modifiche tecniche

Questa brochure potrebbe contenere informazioni su prodotti non disponibili in alcuni paesi

Dati per l'ordinazione

Codice articolo	Descrizione	Ø/Lunghezza	Confezione/Pezzi
85.921	Micro-Ago 21G x 3/4", verde	0,8 mm / 36 mm	50/scatola, 500/cartone
85.923	Micro-Ago 23G x 3/4", blu	0,6 mm / 36 mm	50/scatola, 500/cartone
85.925	Micro-Ago 25G x 3/4", arancio	0,5 mm / 36 mm	50/scatola, 500/cartone

SARSTEDT S.r.l.
Via L. Da Vinci, 97
20090 Trezzano, SUL Naviglio (MI)
Tel: +39 045 8510 114
Fax: +39 045 8510 118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com