

# SAHARA 4

Suché temperování transfuzních přípravků

NOVINKA!



## Nová generace – inovativní a bezpečné temperování

- Rychlá dostupnost transfuzních přípravků díky automatickému rozpoznání stavu agregátu a komfortní výměně během probíhajícího procesu temperování
- Samostatné monitorování teplot pro každý transfuzní přípravek
- Rizika kontaminace patogenními zárodky bakterií vyskytujícími se ve vlhkém prostředí jako u procesů na bázi vody jsou vyloučena
- Aktivní sušení povrchu vaků umožňuje hygienické podmínky v bezprostřední blízkosti transfuzního přípravku
- Možnost využití řízení dat
- Intuitivní vedení obsluhy prostřednictvím 7palcového barevného dotykového displeje

Ohřivací deska

- 4 samostatné ohřivací zóny
- Agitace vaků pomocí inovativního pohybu nahoru/dolů a do stran

Infračervený senzor

- Zaznamenávání teploty transfuzních přípravků samostatně pro každý vak

Uzavíratelné víko

- Vizuální kontrola transfuzních přípravků pomocí průhledného víka a vnitřního osvětlení

Obsluha a čištění

- Časy temperování není nutné nastavovat předem
- Intuitivní vedení obsluhy prostřednictvím barevného dotykového displeje
- Snadné čištění přístroje díky odnímatelné ohřivací desce a záchytné misce

Integrovaný test funkčnosti

- Kontrola funkcí přístroje
- Není nutné používat přídavné měřicí zařízení
- Možnost vyhotovení protokolu pomocí USB disku

Monitorování teplot

- Samostatné monitorování teplot a hlášení o „připravenosti k vyjmutí“ pro každý rozmrazovaný transfuzní přípravek
- Automatické rozpoznání stavu agregátu a komfortní výměna během probíhajícího procesu temperování
- Temperování při konstantní okolní teplotě (mezi 37 °C a 42 °C), kterou lze předem navolit
- Alarm při příliš vysoké teplotě
- Upozornění na odebrání pro každý transfuzní přípravek

7palcový barevný dotykový displej


- Intuitivní a rychlé vedení obsluhy
- Zpožděná reakce tlačítek zabraňuje neúmyslnému přerušení procesu temperování

Řízení dat

- Využití jako možnost navíc
- Načtení registračních údajů pomocí čtečky čárových kódů
- Dokumentace průběhu teplot pro každý jednotlivý vak
- Přenos dat pomocí USB disku
- Ukazatel stavu datových záznamů

Volitelná nabídka

- Výběr mezi různými jazyky systému
- Úprava cílové teploty
- Nastavení hlasitosti pro pokyny a alarmy
- Aktivace řízení dat

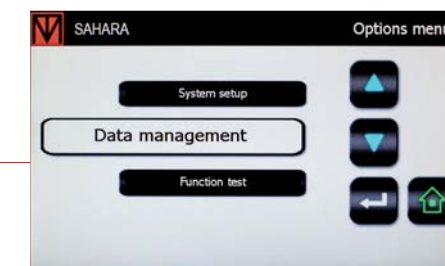

## Informace pro objednávání

Objednáací číslo	Název produktu	prodejní jednotkové množství
97.8720.500	SAHARA 4	1

## Příslušenství

Objednáací číslo	Název produktu	prodejní jednotkové množství
97.8720.440	Skener TOUCH 65 PRO USB	1

## Technické údaje

Rozměry (Š x V x H):	574x348x554 mm
Hmotnost:	27,3 kg
Jmenovité napětí:	100–240 V AC
Frekvence napájecího napětí:	50/60 Hz
Max. příkon:	1000 W

### Distribuce:

SARSTEDT AG & Co. KG  
P.O. Box 12 20  
D-51582 Nümbrecht  
Phone: +49 2293 305 0  
Fax: +49 2293 305 3992  
export@sarstedt.com  
www.sarstedt.com