

SMC 6 V

Производительная настольная центрифуга с настраиваемыми параметрами

НОВИНКА
Теперь 2500 x g




- 3 программы центрифугирования с разнообразными настройками
- Центрифугирование до 2500 x g
- Высокое качество и простота управления



3 доступные программы центрифугирования

Доступны 3 программы центрифугирования.

- Программа 1: кровь, 2500 x g в течение 10 минут
- Программа 2: моча, 500 x g в течение 5 минут
- Программа 3: различные настройки

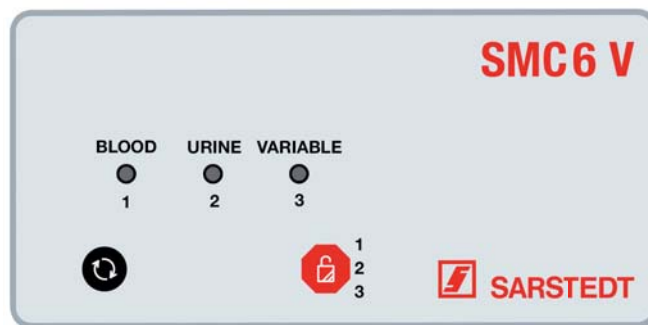

Оптимальный разделительный слой благодаря ротору-крестовине


Центрифуга SMC 6 V предназначена для специальных врачебных кабинетов и небольших лабораторий и может работать со всеми распространёнными видами пробирок. Образование надёжного гелевого барьера в пробирках с сывороткой или плазмой возможно непосредственно после взятия крови. За счёт этого диффузионного барьера обеспечивается стабильность проб.

Центрифугирование в роторе-крестовине (SMC 6 V)

- Разделительный слой толстый и стабильный
- Больше материала доступно для автоматических анализаторов


Ротор-крестовина

Для получения оптимально выраженного гелевого слоя при центрифугировании S-Monovette® рекомендуем использовать роторы-крестовины.

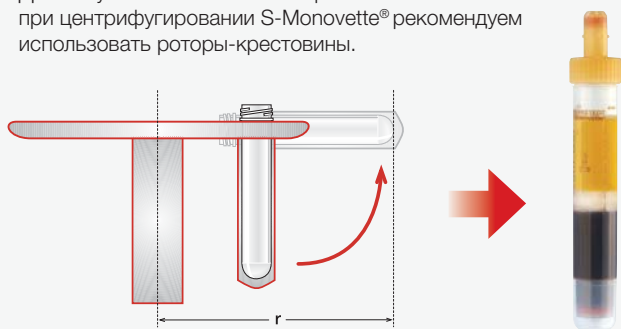

Центрифугирование в угловом роторе

- Разделительный слой тонкий и нестабильный
- Меньше материала доступно для автоматических анализаторов

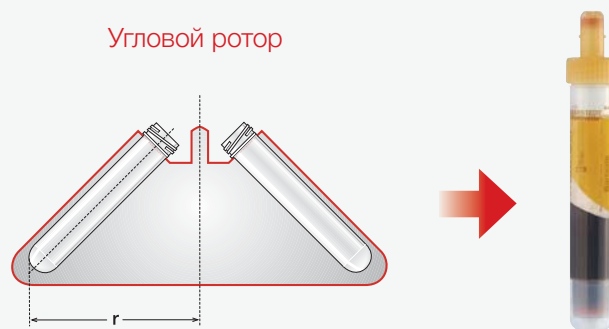

Простота в обращении

Благодаря простоте настройки с помощью всего двух или трех кнопок исключены ошибки управления и случайное изменение частоты вращения и времени.

Высокое качество и малый объём обслуживания

Периодические проверки согласно правилам техники безопасности UVV не требуются в связи с низкой потребляемой мощностью и энергией.

Информация для заказа

Кат. №	Наименование
90.184.400	Центрифуга SMC 6 V

САРШТЕДТ АГ & Ко. КГ
Представительство в Москве
Большой Строченовский пер. 7, офис 602
115054 Москва
Тел./факс: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com