



*Συστήματα αιμοληψίας
για την παιδιατρική*

Παιδιατρική

Τα παιδιά – η πιο ευαίσθητη ομάδα ασθενών – απαιτούν ένα ειδικό, ήπιο σύστημα αιμοληψίας



Νεογνά



Νήπια



Παιδιά σχολικής ηλικίας

Οι μικρότεροι ασθενείς μας

Καμία άλλη ομάδα ατόμων δεν παρουσιάζει όμοιες προκλήσεις όσον αφορά ένα σύστημα αιμοληψίας. Για τον λόγο αυτό, εξειδικευτήκαμε στις συγκεκριμένες ανάγκες και αναπτύξαμε βέλτιστα συστήματα αιμοληψίας, τα οποία επιτρέπουν μια ήπια και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη αιμοληψία για τους μικρούς και ακόμα πιο μικρούς ασθενείς μας.

Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην απόλυτη ελαχιστοποίηση του αντίστοιχου όγκου πλήρωσης, προκειμένου να διατηρήσουμε τη διαγνωστική απώλεια αίματος όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Ανάλογα με την ηλικία, το βάρος και τον όγκο αίματος, μπορείτε να επιλέξετε από μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων τόσο για τριχοειδική όσο και φλεβική αιμοληψία.

Έχουμε τη λύση για τις διαφορετικές απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων



Νεογνολογία - νεογνά

Ελάχιστος όγκος δείγματος για τους πιο μικρούς ασθενείς



Μικροκάνουλες, Μικροφιαλίδια δείγματος & Safety-Heel®



Μικροκάνουλες & μικροφιαλίδια δείγματος

Η μικροκάνουλα σχεδιάστηκε για τις ιδιαίτερες ανάγκες της νεογνολογίας και διαθέτει μια κυματοειδή λαβή, η οποία διασφαλίζει μια βέλτιστη και ασφαλή παρακέντηση. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαμέτρους. Λόγω του κοντού σχεδιασμού της κάνουλας υπάρχει ελάχιστος νεκρός χώρος κατά την ανάκτηση του δείγματος. Εκτός από ασφαλή παρακέντηση, η λαβή της μικροκάνουλας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα περιστροφής της κάνουλας που βρίσκεται μέσα στη φλέβα. Έτσι η έμφραξη του ανοίγματος της κάνουλας μπορεί να εξαλειφθεί με απλό τρόπο. Επιπλέον, κατάλληλα μικροφιαλίδια δείγματος με βιδωτό πώμα ή πιεστό πώμα και Microvette για μικρές ποσότητες δείγματος είναι διαθέσιμα με διαφορετικές προπαρασκευές.

Το εύρος του ονομαστικού όγκου κυμαίνεται από τα 100μl μέχρι τα μέγιστο 1,3 ml ανάλογα με τον τύπο του φιαλιδίου και την προπαρασκευή.

Safety-Heel®

Συγγενή μεταβολικά νοσήματα και ενδοκρινοπάθειες πρέπει να ανιχνεύονται νωρίς προκειμένου να αρχίσει η κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία.

Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνεται δείγμα αίματος για «προσυμπτωματικό έλεγχο νεογνών» (κυρίως με τρύπημα στη φτέρνα). Καθώς με τους συμβατικούς σκαρφιστήρες το τρύπημα γίνεται με κάθετη παρακέντηση, ο κίνδυνος τραυματισμού (τρύπημα διαμέσου πολλαπλών στιβάδων δέρματος μέχρι το οστό) και σχηματισμού αιματώματος είναι πολύ υψηλός. Δεδομένου ότι αυτό είναι συχνά μια επώδυνη διαδικασία, με τους σκαρφιστήρες τομής Safety-Heel® έχετε έναν βέλτιστο τρόπο να μειώσετε αυτό το αίσθημα πόνου και να βελτιστοποιήσετε την ανάκτηση αίματος.

Με το Safety-Heel® ο σχηματισμός αιματωμάτων εξαλείφεται μέσω της ημικυκλικής διαδρομής της τομής και του χαμηλού βάθους της, παρέχοντας έτσι έναν πολύ πιο άνετο προσυμπτωματικό έλεγχο των μικρών ασθενών σας.

Εύκολο στη χρήση

Η κυματοειδής λαβή επιτρέπει την απλή και ασφαλή παρακέντηση. Για την συλλογή σταγόνων αίματος διατίθεται ένα κατάλληλο μικροφιαλίδιο δείγματος.



Safety-Heel®
Ήπια αιμοληψία με τρύπημα στη φτέρνα...



Βρέφη – νήπια

Λήψη τριχοειδικού αίματος για νήπια



Microvette® & Σκαρφιστήρας ασφαλείας



Σκαρφιστήρας ασφαλείας & Microvette®

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, διατίθεται το Microvette® με κυλινδρικό ή κωνικό εσωτερικό σχήμα φιαλιδίου και εύρος όγκου από 100 έως 500 μλ.

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης τριχοειδικού αίματος μέσω ενός αποκαλούμενου τριχοειδούς End-to-End ή η λήψη με ειδικό χείλος.

Επιπλέον, τα Microvette μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φιαλίδια συλλογής για ανοιχτή, φλεβική αιμοληψία.

Οι διαφορετικές παραλλαγές των σκαρφιστήρων ασφαλείας παρέχουν στον χρήστη τη δυνατότητα να προσαρμόζει το βάθος εισαγωγής και την ποσότητα του απαιτούμενου αίματος στις ανατομικές συνθήκες των μικρών ασθενών με ιδανικό τρόπο.

Microvette® – Ένα προϊόν, τρεις εφαρμογές

Το Microvette® επιτρέπει την αιμοληψία με το τριχοειδές End-to-End, με το ειδικό χείλος ή ως φιαλίδιο λήψης σταγόνων.



Microvette® 100/200 – Αιμοληψία με τριχοειδές End-to-End



Microvette® 300/500 – Αιμοληψία με το ειδικό χείλος



Microvette® ως φιαλίδιο λήψης σταγόνων

Διαφορετικές δυνατότητες παρακέντησης με τους σκαρφιστήρες ασφαλείας



Νήπια – Παιδιά σχολικής ηλικίας

Λήψη φλεβικού αίματος με τον χαμηλότερο δυνατό όγκο δείγματος




S-Monovette® & Safety-Multifly®



Κάνουλα Safety-Multifly® & S-Monovette®

Η ευαισθησία των σύγχρονων συστημάτων ανάλυσης καθιστά δυνατή τη μείωση του απαιτούμενου όγκου δείγματος, ακόμη και για εκτενείς εξετάσεις ρουτίνας. Μέσω του ειδικού σχεδιασμού του με μειωμένες διαστάσεις και χαμηλό ονομαστικό όγκο, το παιδιατρικό S-Monovette® πληροί αυτές τις υψηλές απαιτήσεις με ιδανικό τρόπο. Με τη δυνατότητα ήπιας αιμοληψίας μέσω της τεχνολογίας αναρρόφησης, το παιδιατρικό S-Monovette® αποτελεί μια ιδανική λύση για τις δύσκολες φλεβικές συνθήκες των παιδιατρικών ασθενών.

Βελτιωμένη ασφάλεια και άνεση για ασθενείς και χρήστες

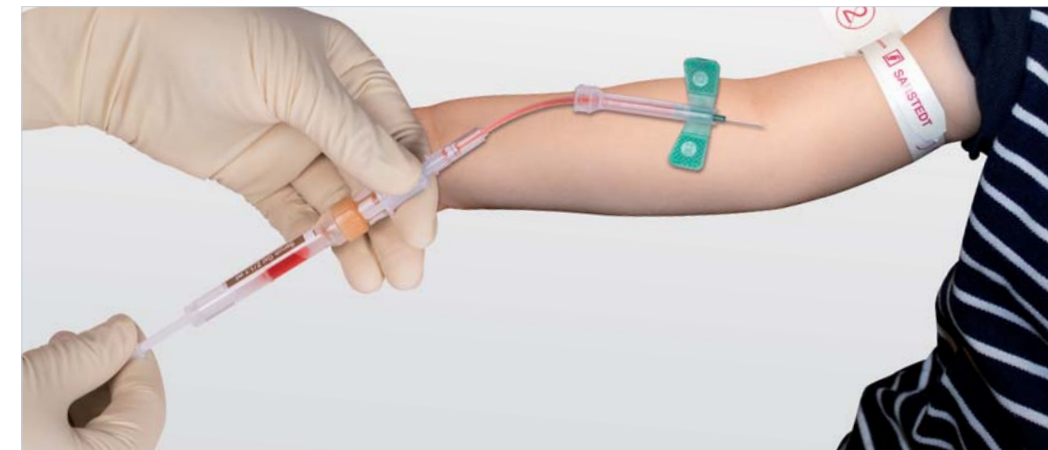

S-Monovette® & Microvette®
(συμπεριλ. κατάλληλου σωληναρίου-φορέα)

	Ορός	Ορός-γέλη	Ηπαρίνη λιθίου	Ηπαρίνη λιθίου-γέλη	EDTA	Φθοριούχο	Πήξη, κίτρινο	Καθίζηση ερυθρών
S-Monovette® 1,1 / 1,2 ml 8 mm Ø _{1,3}	06.1663.001	06.1667.001	06.1666.001	06.1669.001	06.1664.001	06.1665.001	06.1668.001	05.1079*
Microvette® 500 μl _{1,2}	20.1343	20.1344	20.1345	20.1346	20.1341			
Microvette® 300 μl _{1,2}	20.1308		20.1309			20.1307		
Microvette® 200 μl _{1,2}	20.1290	20.1291	20.1292		20.1288	20.1289		
Microvette® 100 μl _{1,2}	20.1280		20.1282		20.1278			
Microvette® CB 200 BSG ^{1,2}								18.1325

* S-Monovette® 2 ml, 66 x 11 mm Ø

¹ κατάλληλο για σωληνάριο-φορέα 75 x 13, Αρ. παραγγελίας 55.1571

² κατάλληλο για σωληνάριο-φορέα 75 x 13, Αρ. παραγγελίας 55.525.003

³ κατάλληλο για σωληνάριο-φορέα 65 x 13, Αρ. παραγγελίας 55.1572

Μικροφιαλίδια δείγματος


	Ορός	Ορός-γέλη	Ηπαρίνη λιθίου	EDTA	Φθοριούχο	Πήξη, κίτρινο
Μικροφιαλίδιο δείγματος 1,3 ml με πιεστό πώμα	41.1501.005	41.1500.005	41.1503.005	41.1504.005	41.1505.005	41.1506.005
Μικροφιαλίδιο δείγματος 1,0 ml με πιεστό πώμα						41.1506
Μικροφιαλίδιο δείγματος 0,5 ml με πιεστό πώμα						41.1506.002
Μικροφιαλίδιο δείγματος 1,3 ml με βιδωτό πώμα	41.1392.005		41.1393.005	41.1395.005	41.1394.005	41.1350.005
Μικροφιαλίδιο δείγματος 1,3 ml με βιδωτό πώμα με μεμβράνη				41.3395.005		
Μικροφιαλίδιο δείγματος 1,1 ml με βιδωτό πώμα		41.1378.005				

Μικροκάνουλα, Σκαρφιστήρας ασφαλείας, Safety-Heel® Σκαρφιστήρας τομής, Safety-Multifly®

	21 G x 3/4"	23 G x 3/4"	25 G x 3/4"	28 G	Λεπίδα 1,5 mm ευθεία	Λεπίδα 1,75 mm τομής	Λεπίδα 2,5 mm τομής
Μικροκάνουλα	85.921	85.923	85.925				
Σκαρφιστήρας ασφαλείας				85.1015	85.1019		
Safety-Heel® Σκαρφιστήρας τομής						85.1023	85.1022
Safety-Multifly®	85.1638.205	85.1640.205	85.1642.205				

Στατώ ESR για Microvette® CB 200

Αρ. παραγγελίας	Υλικό	Τύπος	Συσκευασία Τεμάχια/κουτί
90.1091	Πλαστικό	Στατώ ESR για Microvette® CB 200	1

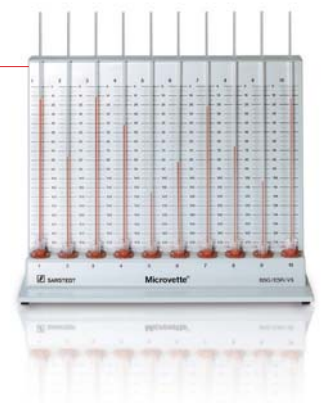

Monovette® ούρων

Αρ. παραγγελίας	Όγκος σε ml	Μήκος σωληναρίου / Ø σε mm	Τύπος	Συσκευασία Τεμάχια/κουτί
10.250.001	3,2	75/13	με χάρτινη ετικέτα, συμπεριλ. άκρου αναρόφησης	512





*Εάν έχετε ερωτήσεις:
Είμαστε ασφαλώς
στη διάθεσή σας
για να βοηθήσουμε!*

 **SARSTEDT**

Sarstedt M. Ε.Π.Ε.
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
19004 Σπάτα Αττικής
Τηλ. 210 6038.274
210 6038.275
Fax 210 6038.276