

12 ml skúmavka s kónickým dnom

Množstvo laboratórnych aplikácií a precízne analýzy si vyžadujú vizuálnu kontrolu a zhodnotenie objemu vzorky. Predovšetkým na takéto použitie ponúka spoločnosť Sarstedt 12 ml skúmavky s kónickým dnom z číreho, transparentného polystyrénu.


Zalisovaná stupnica s 0,5 ml stupňami umožňuje bezpečnú kontrolu objemu aj v prípade tmavých alebo nepriehľadných tekutín. Vďaka kónickému tvaru sa počas centrifugácie spoľahlivo odoberú dokonca aj malé množstva tuhých látok s vysokou hustotou.

Pre optimálne použitie v rôznych aplikačných oblastiach ponúka spoločnosť Sarstedt 110 x 17 mm centrifugačné skúmavky z polystyrénu, teraz aj v osvedčenom zväzkovom balení a v sterilnom vyhotovení. Na aplikácie s vysokým tepelným, chemickým a mechanickým zaťažením odporúčame použitie zvlášť odolnej a autoklávovateľnej kónickej skúmavky z polypropylénu.

Takto rozšírená ponuka produktov ponúka univerzálnu alternatívu ku kónickým skúmavkám s rozmermi 105 x 16,8 mm a 95 x 16,8 mm.

Prehľad výhod:

- Jednoduchá kontrola objemu
- 40 % úspora miesta vďaka zväzkovému baleniu
- Sterilné vyhotovenie s pripojeným uzáverom

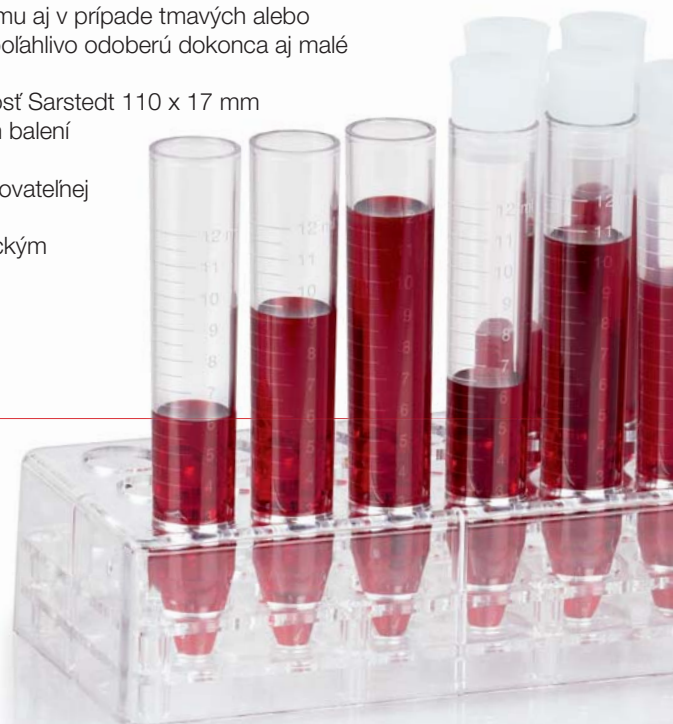

TIP

Vyskúšajte aj naše 10 ml kónické skúmavky z transparentného polypropylénu. Veľké popisné pole ponúka dostatok miesta pre jednoznačné a odolné označenie skúmavky. Vytláčená biela stupnica Vám umožní ľahšiu kontrolu stavu naplnenia.

Objednávacie informácie

Obj. č.	Materiál	Vyhotovenie	Vhodný uzáver	Balenie	Alternatíva k
57.462	Polystyrén	Vrecko	65.793 65.816	1.000/kartón 500/vrecko	57.464.005 57.469
57.462.015	Polystyrén	Balenie v zväzkoch	65.793 65.816	1.000/kartón 250/zväzok	57.464
57.462.001	Polystyrén	sterilné, pripojeným uzáverom	---	500/kartón 100/vrecko	57.464.001
57.527	Polypropylén	Vrecko	65.793 65.816	1.000/kartón 500/vrecko	57.513 57.519

Objednávacie informácie 10 ml kónické skúmavky

Obj. č.	Materiál	vhodný uzáver	Balenie
62.9924.272	Polypropylén	65.816 65.720 65.793	1.000/kartón 500/vrecko

Sarstedt spol. s r.o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel: +421 268 245 933
Fax: +421 268 245 934
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com