

Μικροσωληνάρια 5 ml


Η επιλογή ενδιάμεσου μεγέθους για το εργαστήριο

NEO!



Το μικροσωληνάριο για μεσαίους όγκους:

- Βολικός χειρισμός ποσοτήτων πλήρωσης μεταξύ 2 και 5 ml
- Αξιόπιστη σφράγιση SafeSeal
- Ποιότητα PCR Performance-Tested για πιο απαιτητικές εφαρμογές

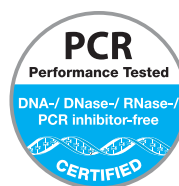

SARSTEDT

Αξιόπιστος χειρισμός ποσοτήτων πλήρωσης μεταξύ 2 και 5 ml

Εφαρμογές ρουτίνας στο εργαστήριο όπως διαδοχικές αραιώσεις, διάσπαση κυττάρων ή εφεδρική αποθήκευση δειγμάτων συχνά απαιτούν ικανότητα πλήρωσης άνω των 2 ml. Φιαλίδια μεγαλύτερου όγκου συχνά δεν είναι ιδανικά για τον σκοπό αυτό λόγω του λεπτού σχεδιασμού τους ή του βιδωτού πώματος.

Το νέο μικροσωληνάριο της Sarstedt συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των μικροσωληναρίων SafeSeal και των βιδωτών σωληναρίων 5 ml σε ένα φιαλίδιο. Με εύκολο άνοιγμα με το ένα χέρι χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό τους, κουμπωτά πώματα με σφράγιση χείλους και δακτυλίους συγκράτησης παρέχουν ασφαλή σφράγιση ακόμα και υπό θερμική καταπόνηση. Η φαρδιά σύνδεση πώματος επιτρέπει το εύκολο και ακριβές κλείσιμο. Αποκλείεται η ανάμειξη ξεχωριστών βιδωτών πωμάτων.



Πλεονεκτήματα μικροσωληναρίου 5ml με μια ματιά

- Ανθεκτικό πολυπροπυλένιο – δυνατότητα φυγοκέντρησης μέχρι τα 21.000 x g, δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο
- Ανάγλυφες διαβαθμίσεις – εύκολος έλεγχος του όγκου
- Πεδίο επισήμανσης και εσφυρισμένο πώμα – ασφαλής επισήμανση και γρήγορη αναγνώριση
- Χαμηλό ύψος – χαμηλός κίνδυνος μόλυνσης, καθώς ο κώνος της πιπέτας δεν βυθίζεται μέσα στο φιαλίδιο
- Μικρό μέγεθος – εξοικονόμηση χώρου για φύλαξη δειγμάτων, θρεπτικών μέσων ή καλλιιεργειών

Πληροφορίες παραγγελιών

Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Συσκευασία
72.701	Μικροσωληνάριο 5 ml	100/σακούλα 200/κουτί
72.701.400	Μικροσωληνάριο 5 ml, PCR Performance Tested	100/σακούλα 200/κουτί



Παρελκόμενα

Αρ. παραγγελίας	Περιγραφή	Μορφή	Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Συσκευασία
93.850.001	Βάση από πολυανθρακικό για 18 τεμάχια μικροσωληναρίων των 5 ml	6 x 3	137 x 70 x 40 (Μ x Π x Υ)	1/κουτί
93.1431.001	Βάση από πολυανθρακικό για 48 τεμάχια μικροσωληναρίων των 5 ml	12 x 4	257 x 90 x 40 (Μ x Π x Υ)	1/κουτί

Sarstedt M. E.Π.Ε.
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου
19004 Σπάτα Αττικής
Τηλ.210 6038.274
210 6038.275
Fax 210 6038.276