

Sada S-Monovette® POC Collect Kit

Kontrolovaný odběr krve a náběr vzorků



Již žádné chyby
v point of care
diagnostice!



SARSTEDT

Pro VŠECHNY venózní a arteriální POC vzorky!

Sada S-Monovette® POC Collect Kit

- Nižší potřeba testovacích kartuší
- Snadné a kontrolované nabírání vzorků
- Kratší čas odezvy
- Lepší péče o pacienta
- Maximální bezpečnost díky uzavřenému přenosu krve

Sada S-Monovette® POC Collect Kit je vhodná pro kontrolovaný venózní/arteriální odběr krve z cévních přístupů a kontrolované (na kapku přesné) nabírání vzorků na POC testovacích kartuších. Po nabrání vzorku může být zkumavka S-Monovette® odeslána přímo do laboratoře, pokud je nutná kontrolní analýza; ve smyslu Patient Blood Managementu není nutný další odběr krve.

Sada S-Monovette® POC Collect Kit minimalizuje výrazně chybovost a nabízí konečnému uživateli procesní bezpečnost.

- vedoucí laboratoře na klinice s 387 lůžky



Odstraňte nebo minimalizujte zdroje chyb, které můžete ovlivnit:

- Přeplnění
- Nedostatečné naplnění
- Vzduchové bublinky
- Komplikovaná manipulace

Tři nemocnice, každá s více než 500 lůžky, prováděly dohromady 27 630 POC testů. Nová sada S-Monovette® POC Collect Kit snížila procento ovlivnitelných chyb z průměrných 15 % na méně než 1 %.

A to bez jediné přeplněné testovací kartuše, nejčastější chyby.

NOVÉ



Nemocnice A - Ovlivnitelné chyby sníženy na 1,06 %

Kde	Celkový počet testovacích kartuší	Období	Počet neměřených testovacích kartuší	Relativní podíl neměřených testovacích kartuší
Celá nemocnice	5 015	7 měsíců	53	1,06 %

Nemocnice B - Ovlivnitelné chyby sníženy na 0,95 %

Kde	Celkový počet testovacích kartuší	Období	Počet neměřených testovacích kartuší	Relativní podíl neměřených testovacích kartuší
Celá nemocnice	7 976	12 měsíců	76	0,95 %

Nemocnice C - Ovlivnitelné chyby sníženy na 0,65 %

Kde	Celkový počet testovacích kartuší	Období	Počet neměřených testovacích kartuší	Relativní podíl neměřených testovacích kartuší
Celá nemocnice	14 639	9 měsíců	95	0,65 %

Obsah sady:


- Multiadaptér Luer Lock pro napojení na cévní vstup
- POCT DISPENZOR pro nabrání vzorku
- S-Monovette® 1,2ml lithium-heparin pro odběr krve a náběr vzorku

informace o objednávání



Obj. č.	Název	Balení
51.5100.100	Sada S-Monovette® POC Collect Kit	1 sada/zipový sáček 50 kusů/karton



Manipulace

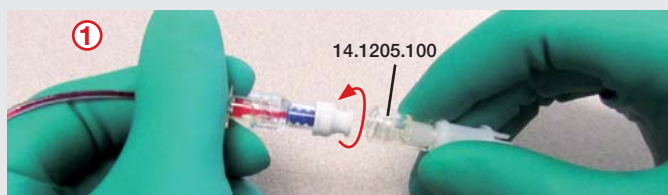

Připravte cévní přístup v souladu s Vašimi interními pokyny pro odběr vzorků. Multiadaptér Luer Lock spojte s cévním vstupem.

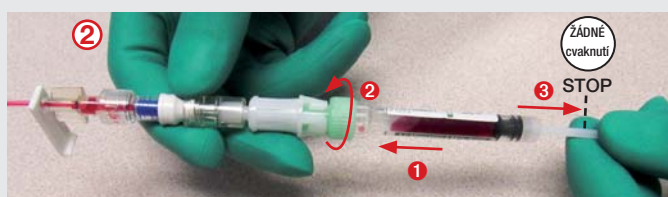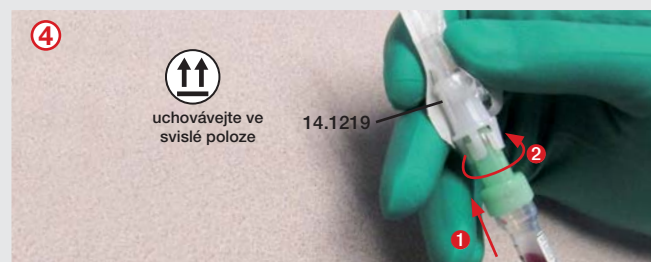

1. První kapku/kapky v souladu s požadavky zařízení nebo testování nepoužijte
2. Vzorek kápněte na testovací kartuši tak, že chytíte spodní okraj pístu a opatrně jím pohybujete dopředu

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9
Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com