

S-Monovette® POC Collect Kit

Kontrollü kan alma ve dağıtım



Point-of-Care
diyagnostikte
hatalardan
kaçınınız!



TÜM venöz ve arteryel POC örnekleri için!

S-Monovette® POC Collect Kit

- Fazla test kartuşu gereksinimi azalır
- Kolay ve kontrollü örnek aktarımı
- Daha kısa Turn-Around süresi
- Daha iyi hasta bakımı
- Kapalı kan transferi sayesinde maksimum güvenlik

S-Monovette® POC Collect Kit kontrollü venöz/arteryel damar girişlerinden kan alma ve Point-of-Care test kartuşlarına kontrollü (damla hassasiyetinde) örnek aktarma işlemleri için uygundur. Örnek verildikten sonra teyit testi gereken durumlarda S-Monovette® doğrudan laboratuvara gönderilebilir; Patient Blood Management kapsamında ayrıca kan alınmasına gerek kalmaz.

S-Monovette® POC Collect Kit hata olasılığını belirgin ölçüde düşürür ve nihai kullanıcıya proses güvenliği sağlar.

- 387 yataklı kliniğin laboratuvar müdürü



Kontrol edilebilir hata kaynaklarını ortadan kaldırın veya azaltın:

- Fazla dolum
- Az dolum
- Hava kabarcıkları
- Kompleks kullanım

Ağırlıklı alanlarda faaliyet gösteren üç hastanede toplam 27.630 Point-of-Care testleri uygulanmıştır. Yeni S-Monovette® POC Collect Kit kontrol edilebilir hataları ortalama %15'lerden %1 değerinin altına düşürmüştür. Hem de en sık görülen fazla dolumlu test kartuşu hatası hiç yaşanmadan.

YENİ

Hastane A - Kontrol edilebilir hatalar %1,06 oranına düşmüştür.

Nerede	Toplam test kartuşu sayısı	Dönem	Ölçülmeyen test kartuşlarının sayısı	Ölçülmeyen test kartuşlarının göreceli oranı
Tüm hastane	5.015	7 ay	53	%1,06

Hastane B - Kontrol edilebilir hatalar %0,95 oranına düşmüştür.

Nerede	Toplam test kartuşu sayısı	Dönem	Ölçülmeyen test kartuşlarının sayısı	Ölçülmeyen test kartuşlarının göreceli oranı
Tüm hastane	7.976	12 ay	76	%0,95

Hastane C - Kontrol edilebilir hatalar %0,65 oranına düşmüştür.

Nerede	Toplam test kartuşu sayısı	Dönem	Ölçülmeyen test kartuşlarının sayısı	Ölçülmeyen test kartuşlarının göreceli oranı
Tüm hastane	14.639	9 ay	95	%0,65

Kitlerin bileşenleri:


- Luer-Lock çoklu adaptör, damar girişine bağlantı için
- POCT DISPENSER, örnek alımı için
- S-Monovette® 1,2ml Lityum-Heparin, kan alımı ve örnek aktarımı için

Sipariş bilgileri



Sipariş no.	Tanım	Ambalaj
51.5100.100	S-Monovette® POC Collect Kit:	1 Kit / Zip torba 50 adet /karton




Kullanım

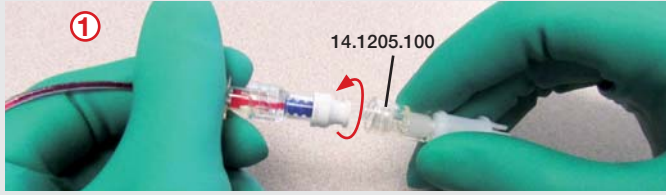

Örnek alımı için damar girişini dahili yönetmeliklere uygun olarak hazırlayın. Luer-Lock çoklu adaptörü damar girişine bağlayın.

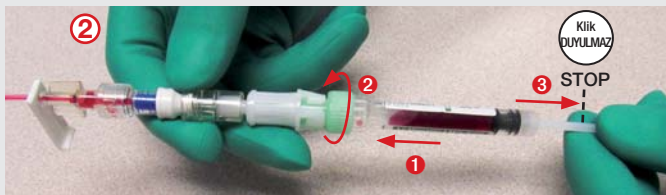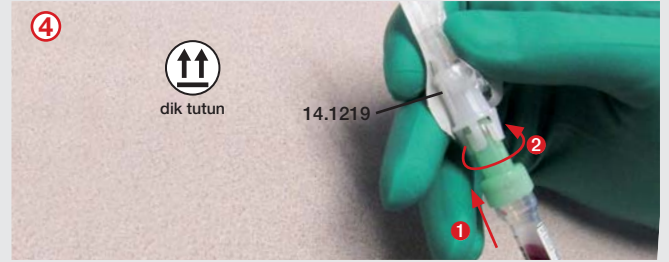

1. Kurumun veya testin kriterlerine göre ilk damlayı/damlaları atın ve
2. pistonun alt kenarını tutup, pistonu yavaşça öne doğru hareket ettirerek örneği test kartuşu üzerine damlatın

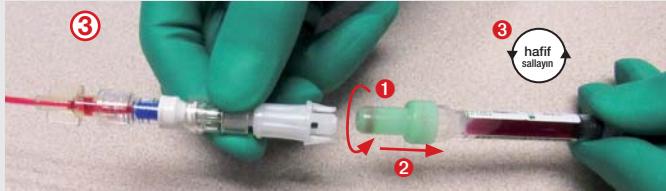

SARSTEDT International GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu, Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158, Üsküdar – İstanbul
Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com