

Microvette® APT

Automated Processing Tube

Apta para el análisis de rutina
con sangre capilar



APTA PARA LA RUTINA DIARIA

- ✓ Procesamiento automatizado de muestras a partir de un volumen de tan solo 250 μ l
- ✓ Tapón con membrana perforable
- ✓ Preparación con EDTA K₂ para 250 – 500 μ l de sangre capilar




Microvette® APT

Automated Processing Tube

Cuando no es posible obtener cantidades suficientes de sangre venosa, la toma de muestras de sangre capilar es una opción, especialmente en pacientes con condiciones venosas difíciles, como los niños o los ancianos.

Microvette® APT está especialmente diseñada para el procesamiento automatizado en sistemas de análisis hematológicos. Cumple con todos los requisitos importantes de un recipiente primario, como las dimensiones del tubo exterior, de 75 x 13 mm.

Nuestra demostrada experiencia y el nuevo tapón de membrana permite procesar un hemograma automatizado, sin necesidad de preparar manualmente la muestra, sin interrumpir la rutina diaria, al igual que con las muestras venosas.

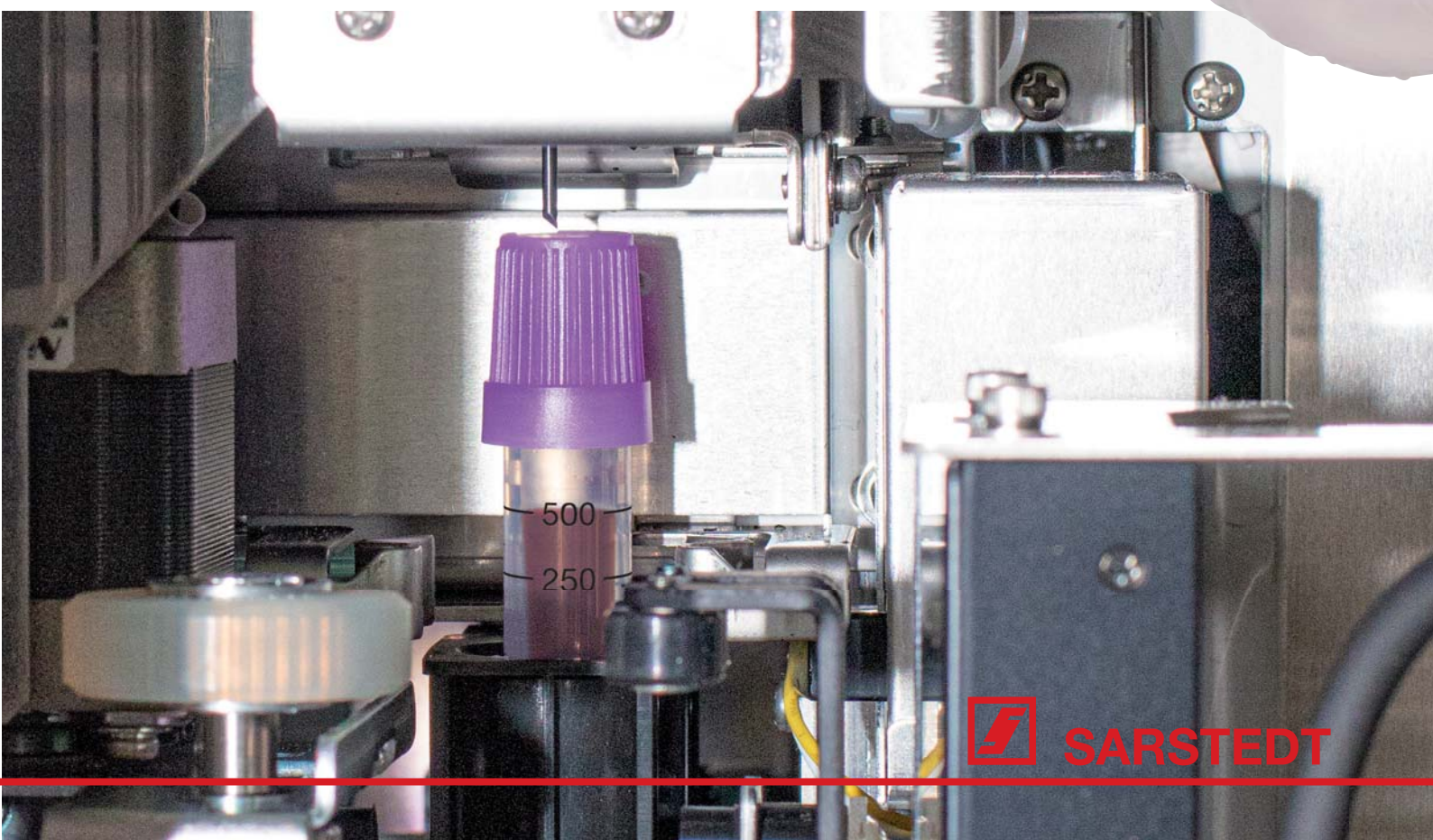

FLEXIBLE

- ✓ Capilares end-to-end (250 µl), para un volumen de muestras definido
- ✓ Recogida de muestras con el borde del tubo. Mezclado óptimo con el anticoagulante.
- ✓ Etiqueta del producto transparente, para facilitar la evaluación de la muestra



Obtención cuidadosa de muestras con capilares end-to-end (250 µl) o borde del tubo. ¡Usted decide!

Las marcas claramente visibles facilitan el llenado exacto.

¡Identificación fiable de las muestras! La longitud del tubo es perfecta para incluir la etiqueta del paciente.

Microvette® APT 250



Microvette® APT 500

Análisis ágil: directo e higiénico desde el recipiente primario.

El tapón de membrana de último diseño garantiza el transporte y el envío seguro de la muestra.





Cuando es importante hacer un diagnóstico significativo con cantidades reducidas de sangre o en condiciones venosas difíciles.



Mayor flexibilidad, gracias a dos técnicas de extracción



Capilar end-to-end – 250 μ l

La Microvette® APT 250 dispone de un capilar end-to-end integrado, que la hace ideal para la recogida de 250 μ l de sangre capilar.

Tras el llenado completo del capilar end-to-end, la cantidad de sangre se puede transferir de forma cómoda e higiénica a la Microvette® APT 250.

Gracias al tapón de fácil manejo, la muestra queda estanca y lista para el transporte.



Borde de recogida 250 – 500 μ l


La Microvette® APT 500 dispone de un volumen de llenado variable de 250 a 500 μ l. Es el recipiente de muestra ideal para sistemas de análisis hematológicos que requieren un volumen de muestra de entre 250 y 500 μ l.

La extracción por todo el borde del tubo favorece un excelente mezclado de la sangre y el anticoagulante, previniendo la formación de coágulos.

Gracias al tapón de fácil manejo, la muestra queda preparada rápidamente y lista para el transporte.

SEGURA

- ✓ Hermética según Directiva de embalaje P 650 de la ADR/ RID
- ✓ Probada con Tempus600®
- ✓ Apta para correo neumático, para un transporte rápido

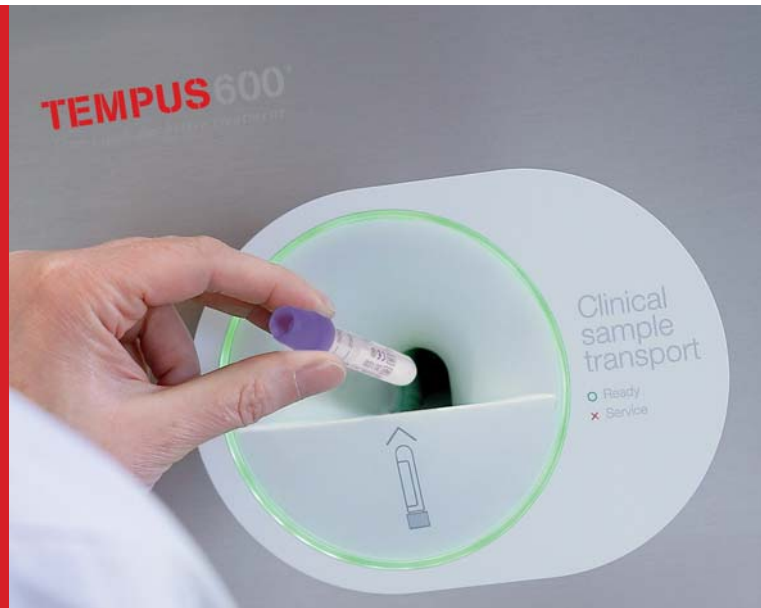

Microvette® APT es apta para el transporte con los sistemas más modernos y cumple los requisitos de la Directiva de embalaje P 650 de la ADR/RID para recipientes primarios.

Al contar con dimensiones idénticas a las de los análisis de rutina venosos, la Microvette® APT permite minimizar las posibilidades de error durante el transporte y el envío, así como durante el procesamiento automatizado en sistemas de análisis hematológicos.

La utilización de la Microvette® APT permite mejorar el tiempo de obtención de resultados analíticos (Turn-Around-Time, TAT) en el análisis de sangre capilar y evitar repetidas extracciones de sangre. En pro del bienestar de grupos de pacientes muy especiales.



SARSTEDT



Información

Ref.	Descripción	Dimensiones	Volumen	Código de color	Presentación
20.2330.100	Microvette® APT 500 K ₂ E	75 x 13 mm	250 - 500 µl	ISO	100 uds./caja interior 500 uds./caja
20.2331.100	Microvette® APT 250 K ₂ E con capilar	75 x 13 mm	250 µl	ISO	50 uds./caja interior 500 uds./caja



SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.

Alfredo B Nobel 3, Bodega 10

Colonia Los Reyes Industrial

54073 Tlalnepantla de Baz

Estado de México

Tel: +5255 8501 1577

Fax: +5255 8501 1578

info.mx@sarstedt.com

www.sarstedt.com



SARSTEDT